




DDR sistemas c.a.

herramientas tecnológicas que optimizan tu consulta

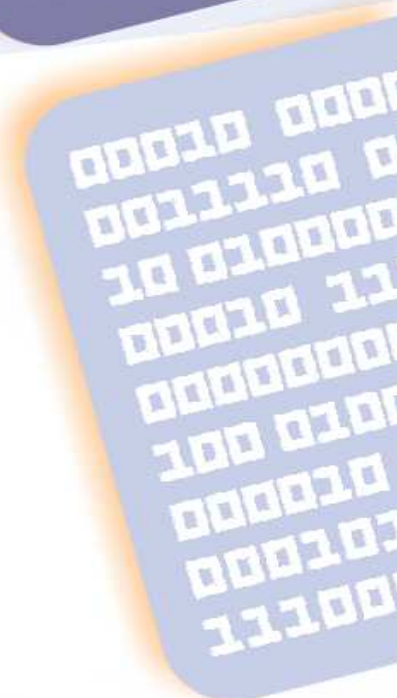

Software de Consultorios Médicos

Guía Rápida de Instalación y Uso

Introducción

El presente manual tiene como objetivo facilitar el uso del sistema ***UroloReport*** a cualquier tipo de usuario, garantizando el mayor beneficio de la aplicación.

El Sistema ***UroloReport*** permite el registro y manejo de las consultas en la especialidad de Urología, así como el registro y control de las Historias Clínicas de los diferentes pacientes.

Indice

-	Requisitos del Sistema para la instalación de la Aplicación	5
-	¿Cómo instalar la aplicación?	6
-	Instalación del Programa	8
-	¿Cómo instalar el Módulo de respaldo?	9
-	¿Cómo usar la Aplicación?	10
-	¿Cómo cambiar la Clave?	12
-	¿Cómo realizar los mantenimientos de las tablas?	13
	▪ Pacientes	14
	▪ Empresas Seguros	15
	▪ Especialidades Médicas	16
	▪ Motivos de Consulta	17
	▪ Diagnósticos	18
	▪ Tipos de Estudio	19
	▪ Exámenes/Estudios	20
	▪ Antecedentes	21
	▪ Médicos	22
	▪ Vandemecum	23
	▪ Elemento de Facturación	24
	▪ Intervenciones	25
	▪ Razón Cita	26
	▪ Plantillas	27
-	¿Cómo configurar datos de Formatos?	28
-	¿Cómo ingresar Nuevos Pacientes?	32
-	¿Cómo cargar una consulta sucesiva?	35
-	¿Cómo llenar la Historia Médica?	38
	▪ Motivo de Consulta	38
	▪ Enfermedad Actual	39
	▪ Antecedentes	40
	▪ Evaluación Física	41
	▪ Procedimientos	44
	▪ Diagnostico	54
	▪ I. Quirúrgica	55
	▪ Evolución	56
	▪ Tratamientos	57

▪	Récipes	58
▪	Solicitudes	59
▪	Pre-Factura	67
-	¿Cómo Hacer Citas?	68
-	¿Cómo Modificar Consultas?	70
-	¿Cómo Llevar la Administración?	72
▪	¿Cómo Facturar?	73
▪	Cómo Generar un Presupuesto?	74
-	¿Cómo emitir Reportes?	75
-	¿Cómo trabajar con el Menú Misceláneos	78



Requisitos del Sistema para la instalación de la Aplicación

A continuación se detallan los requerimientos mínimos necesarios para que el sistema pueda ser instalado y funcione correctamente en su computador:

- ✓ Procesador Pentium III de 500 MHz o superior,
- ✓ Memoria RAM de 256 Mb,
- ✓ Puerto de conexión de red Ethernet ó Wireless
- ✓ Puerto USB.
- ✓ Lector de CD
- ✓ 120 Mb disponibles en el Disco Duro
- ✓ Sistema Operativo Windows 2000 o superior.

¿Cómo instalar la Aplicación?

Introduzca el CD del sistema **UroloReport** en la unidad lectora de CD y espere hasta que la siguiente ventana aparezca.



Esta ventana aparecerá automáticamente y presenta las siguientes opciones:

- Instalar el programa DDR: Este botón permite ejecutar el programa de instalación del sistema **UroloReport**, el cual le permitirá automatizar su consulta.
- Instalar el Módulo de Respaldo: Este botón permite ejecutar el programa de instalación del módulo de respaldo del sistema **UroloReport**. Con éste módulo podrá crear un respaldo de los datos de sus historias médicas, en una unidad de almacenamiento de datos interna: Discos Duros y posteriormente transferirlos a unidades de almacenamiento externo, que puede ser, CD, PenDrive, o cualquiera de su preferencia.




- Ver Video DDR-Sistemas C.A.: Al oprimir este botón aparecerá un video con información relacionada de nuestra empresa y productos.
- Ver Manual – PDF: Al oprimir este botón se abrirá un archivo con el manual de su sistema **UroloReport**. Si su computadora presenta un aviso de error al tratar de abrir este manual, es posible que usted no tenga instalado el programa Adobe Reader 8, el cual se presenta en un botón más abajo.
- Instalar – Intranet Chat: El Intranet Chat es una herramienta que se encuentra en desarrollo actualmente y que le permitirá comunicarse con otros miembros de su centro de diagnóstico o con su secretaria. No disponible para esta versión.
- Instalar – Otras Aplicaciones – Red: Esta opción le permite a nuestro personal especializado interconectar su programa en red con sus colegas en su centro de diagnóstico o con su secretaria. Para más información contáctenos. Usted puede instalar su sistema en Red, o solicitar asesoría a nuestro personal
- Instalar – Impresora WinPDF: Esta opción le permitirá instalar una impresora virtual de archivos en formato PDF.
- Instalar – Adobe Reader 8: Le permitirá instalar la versión 8 del programa Adobe Reader, el cual se utiliza para abrir y presentar archivos del tipo PDF, formato en el cual está diseñado nuestro manual electrónico.
- Salir: Este botón cierra la ventana de instalación antes descrita.

Instalación del Programa

Para instalar el sistema presione el primer botón de la pantalla de instalación (Instalar el programa DDR) y siga las instrucciones del programa de instalación. Si usted considera complicado el proceso y las opciones de instalación, puede presionar el botón “Siguiente”, de la ventana de instalación, repetidamente hasta que se complete el proceso. A continuación se presenta una imagen de la ventana de instalación del sistema **UroloReport**.




Una vez finalizado el proceso de instalación el sistema **UroloReport** se abrirá automáticamente mostrando la siguiente ventana, la cual describiremos más adelante.

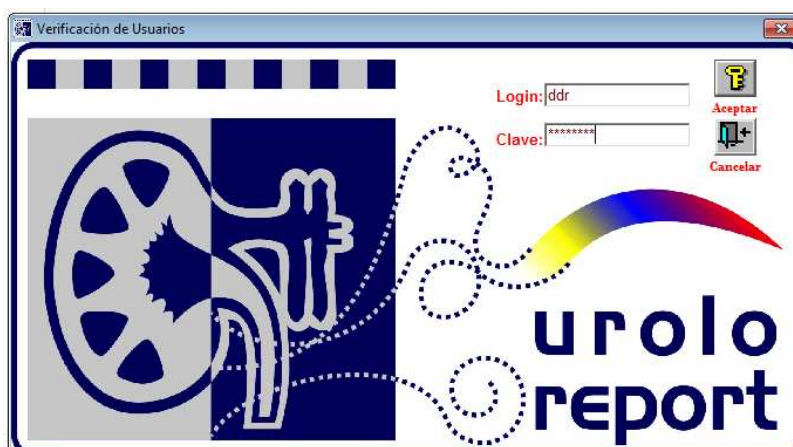

¿Cómo instalar el Módulo de Respaldo?

Para instalar el módulo de respaldo del sistema **UroloReport** presione el segundo botón de la pantalla de instalación (Instalar el Módulo de Respaldo) y siga las instrucciones del programa de instalación. Si usted considera complicado el proceso y las opciones de instalación, puede presionar el botón “Siguiente”, de la ventana de instalación, repetidamente hasta que se complete el proceso. A continuación se presenta una imagen de la ventana de instalación del módulo de respaldo del sistema **UroloReport**

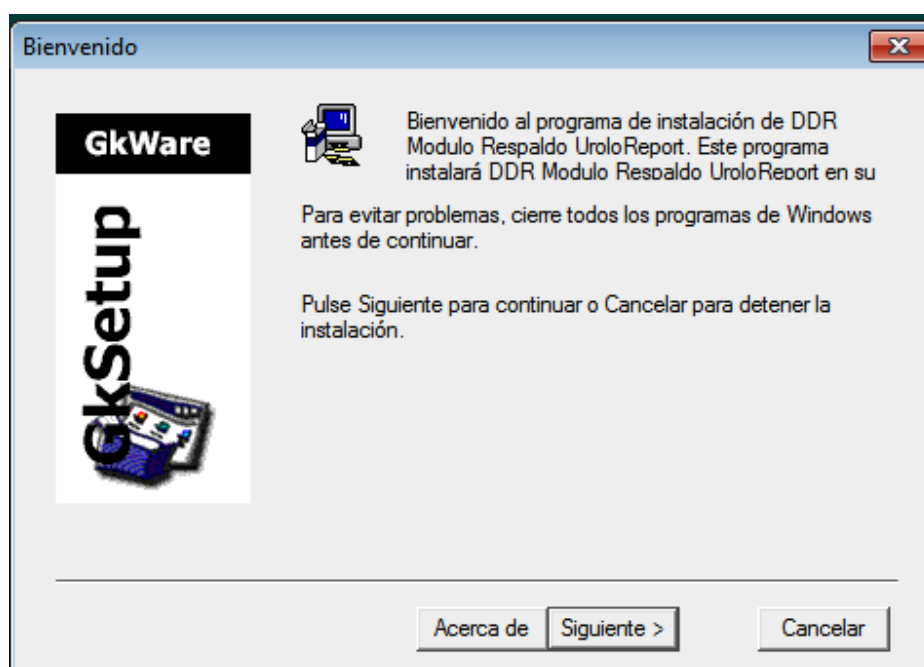


¿Cómo usar la Aplicación?

Una vez instalado el sistema **UroloReport** tendrá a su disposición en el escritorio de su computador un icono llamado **UroloReport**.




Para abrir el sistema **UroloReport** haga doble clic sobre el icono mencionado anteriormente, lo cual abrirá la siguiente ventana:

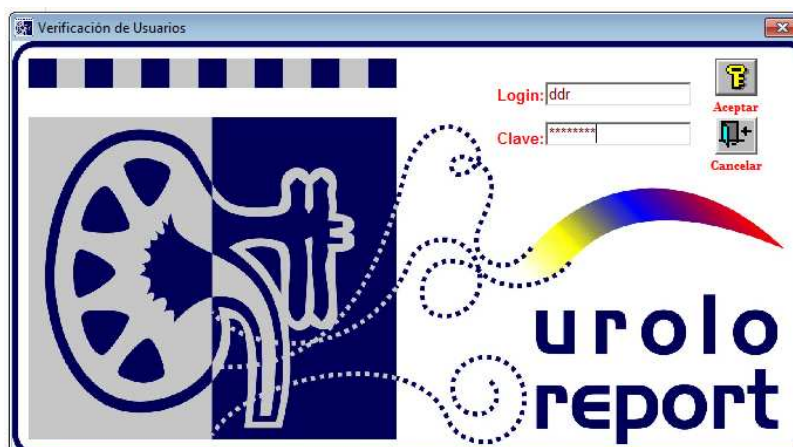

En esta ventana existen dos campos necesarios para abrir el programa, Login y Clave, estos campos por defecto están establecidos en los siguientes valores: Login: ddr Clave: sistemas. Una vez validados estos campos se presenta la ventana del sistema **UroloReport**.




Al ingresar al sistema se presenta la siguiente ventana:

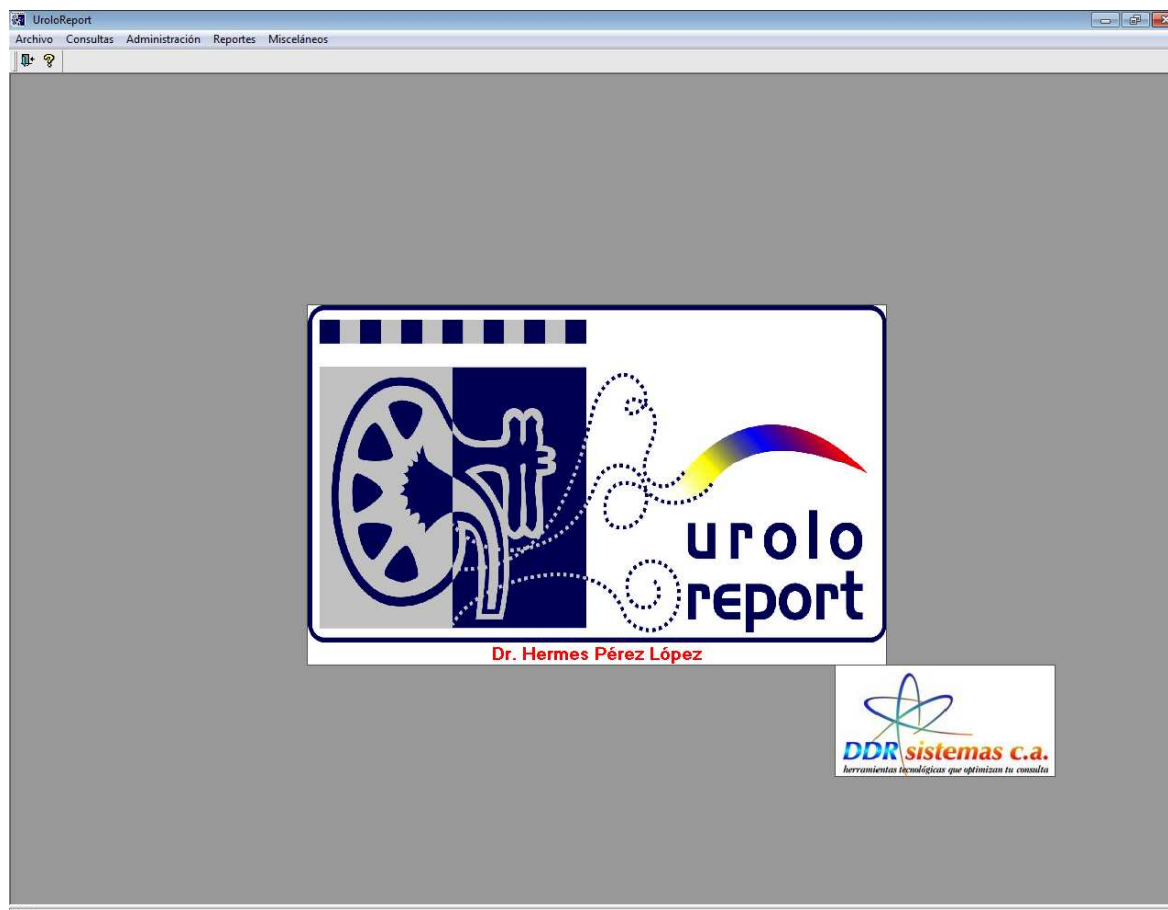


¿Cómo cambiar la clave?

Al ingresar en el sistema hacer click en Archivo, se despliega una ventana con un listado de opciones y seleccionamos *Usuarios*

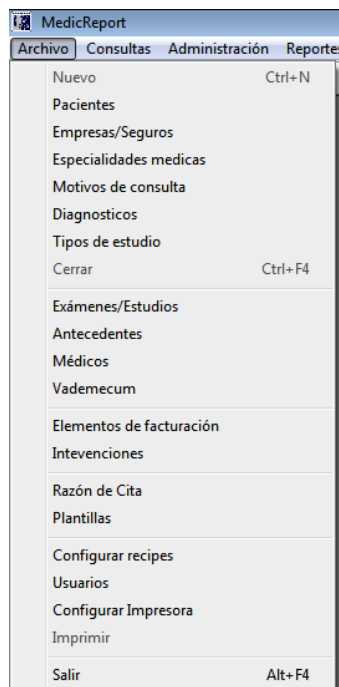

Ingresar los datos solicitados

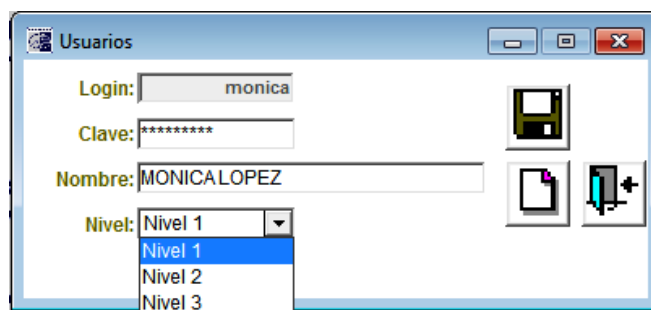

Login: Nombre de usuario para ingresar al sistema

Clave: Asignar una clave para el usuario que estamos ingresando

Nombre: Indicar nombre completo del Usuario.

Nivel: Niveles de Acceso a la aplicación

Nivel 1: Usuario universal, acceso total a todo el sistema.

Nivel 2: Permite al usuario visualizar historias médicas, mas No puede modificarlas

Nivel 3: Solo permite acceder a los datos del paciente y hacer citas.

¿Cómo realizar los mantenimientos de las Tablas ?

En todas las opciones del Menú Archivo, encontramos cuatro iconos, los cuales explicamos su aplicación a continuación:



Este icono nos permite ingresar un registro Nuevo de Aseguradoras



Este icono se utiliza para Grabar la información al incluir los datos de la Aseguradora



Hacemos click en este icono para abandonar esta pantalla



Borrar un registro.

Pacientes

Al ingresar a la aplicación hacemos click en Archivo, al desplegarse la ventana de opciones, entramos a Pacientes y completamos los datos que nos aparecen en la siguiente pantalla:



Pacientes

Cédula: [V] 9578345 S.C. Fecha: 01/07/2011 00001

Apellidos: LANDAETA BERMUDEZ Nombres: ALVARO JOSE

Nacimiento: 15/11/1968 Lugar de Nac.: CARACAS

Dirección: CALLE REAL DE MONTALBAMN QTA. MONTAAL

Celular: 04125789478 Telf.: 02124417854

E-mail: alvarolandaeta@gmail.com

Profesión: VETERINARIO

Ocupación: VETERINARIO Referido:

Est. Civil: Casado(a) Sexo: Masculino Femenino

Seguro/E.: PARTICULAR

Listado de Pacientes

Ordenar por:

Cédula	Historia	Nombre	Edad

Buscar por:

Nombre: Cédula: Historia:

Cédula: Ingresar el número de cédula del Paciente

Apellidos: Ingresar Apellidos del Paciente.

Nombres: Ingresar el Nombre del Paciente.

Dirección: Ingresar la dirección de residencia del paciente.

Celular: Número de teléfono móvil.

Telf.: Número de teléfono de habitación.

E-mail: Correo electrónico para envío de información.



Profesión: Ingresar la carrera o profesión del paciente

Ocupación: Actividad a la que se dedica.

Est. Civil: Indicar el Estado Civil del Paciente.

Sexo: Indicar el sexo del Paciente (Masculino) (Femenino)


Seguro/E: Empresa Aseguradora de Tener Póliza de Seguro Privado.

Hacer click en el icono  Para Guardar la información. El icono  nos permite ingresar un nuevo

Paciente. Para salir de esta pantalla hacemos click en el icono 

Empresas / Seguros

Esta opción nos permite crear un Listado de las compañías de Seguros

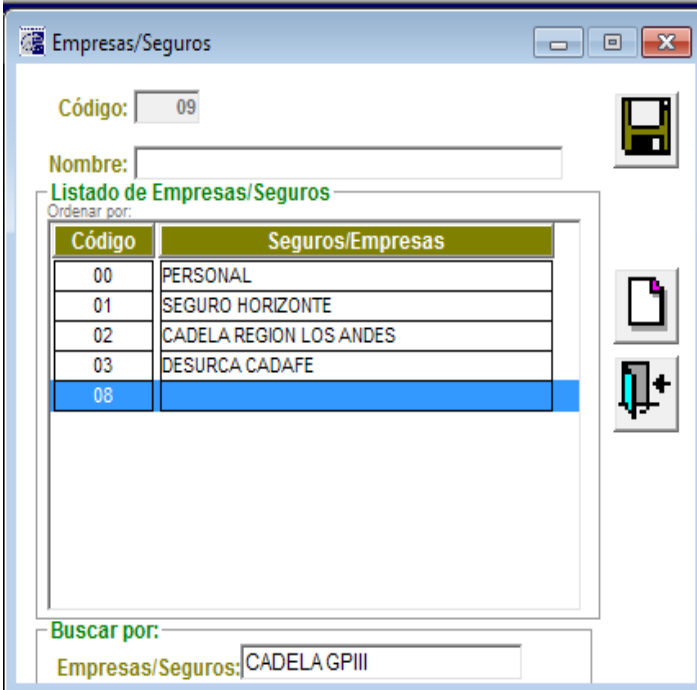

Código	Seguros/Empresas
00	PERSONAL
01	SEGURO HORIZONTE
02	CADELA REGION LOS ANDES
03	DESURCA CADAPE
08	

Código: Numero correlativo.

Nombre: Razón Social de la compañía de Seguros.

Especialidades Médicas

Con esta opción vamos a crear un listado de Especialidades Médicas las cuales vamos a utilizar posteriormente en la Historia Clínica del Paciente.



Especialidades Médicas

Código:

Especialidad:

Listado de Especialidades

Ordenar por:

Código	Especialidad
001	MEDICINA FISICA Y FISIATRIA
002	CARDIOLOGIA
003	RADIOLOGIA
004	FISIOTERAPIA
005	ENDOCRINOLOGIAA
006	NEUMOLOGIA
007	REUMATOLOGIA
008	GASTROENTEROLOGIA
009	ECOSONOGRAFIA
010	CIRUGIA DE COLUMNA
011	NUTRICION
012	NEUROLOGIA

Buscar por:


Especialidad:

Código: Numero correlativo.

Especialidad: Especialidad Médica, como por ejemplo: Obstetricia, Ginecología, Neurología, etc.

Motivos de Consulta

Cada paciente acude a consulta por una causa diferente, en esta opción podemos crear el listado de Motivos a ser utilizados posteriormente en la Historia Médica.

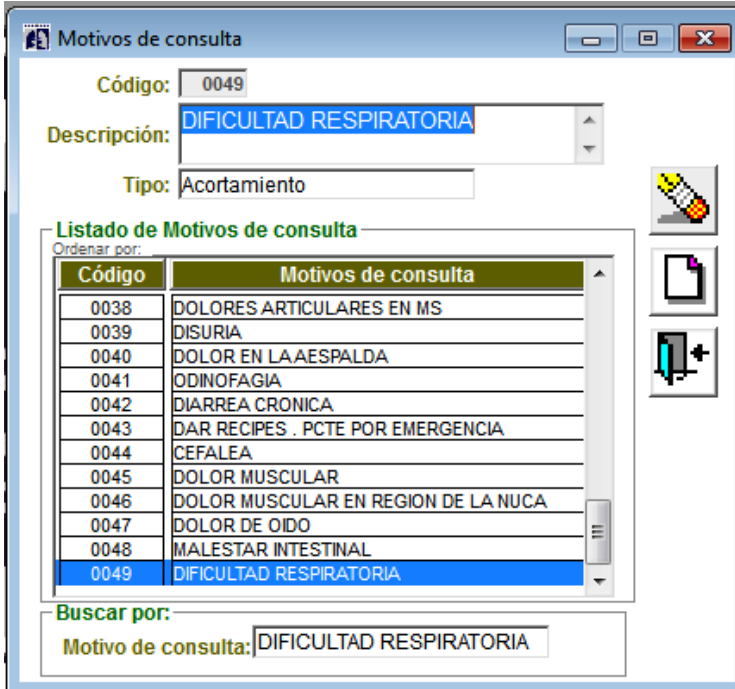

Motivos de consulta

Código: 0049

Descripción: DIFICULTAD RESPIRATORIA

Tipo: Acortamiento

Listado de Motivos de consulta

Ordenar por:

Código	Motivos de consulta
0038	DOLORES ARTICULARES EN MS
0039	DISURIA
0040	DOLOR EN LA AESPALDA
0041	ODINOFAGIA
0042	DIARREA CRONICA
0043	DAR RECIPES . PCTE POR EMERGENCIA
0044	CEFALEA
0045	DOLOR MUSCULAR
0046	DOLOR MUSCULAR EN REGION DE LA NUCA
0047	DOLOR DE OIDO
0048	MALESTAR INTESTINAL
0049	DIFICULTAD RESPIRATORIA

Buscar por:


Motivo de consulta: DIFICULTAD RESPIRATORIA

Código: Numero correlativo.

Descripción: Concepto del Motivo de Consulta.

Diagnósticos

Listado de Diagnósticos, al ser evaluado el paciente y el cual podremos incluir en su Historia Médica para su posterior tratamiento médico

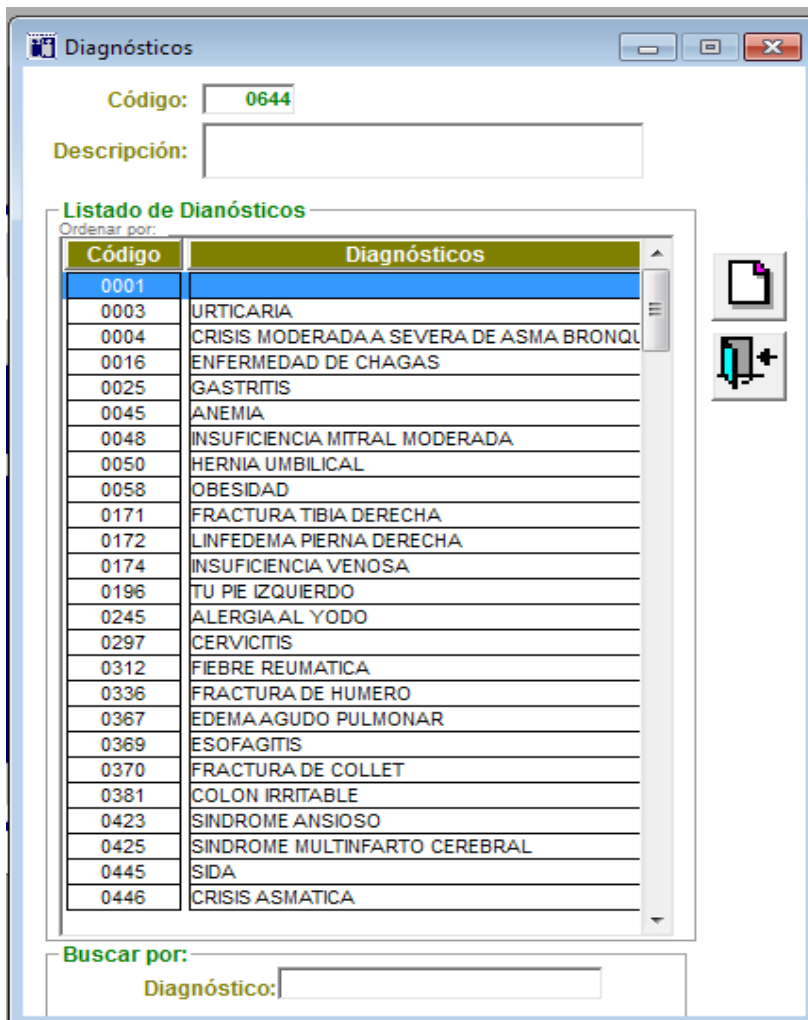

Diagnósticos

Código:

Descripción:

Listado de Diagnósticos

Ordenar por:

Código	Diagnósticos
0001	
0003	URTICARIA
0004	CRISIS MODERADA A SEVERA DE ASMA BRONQUIAL
0016	ENFERMEDAD DE CHAGAS
0025	GASTRITIS
0045	ANEMIA
0048	INSUFICIENCIA MITRAL MODERADA
0050	HERNIA UMBILICAL
0058	OBESIDAD
0171	FRACTURA TIBIA DERECHA
0172	LINFEDEMA PIERNA DERECHA
0174	INSUFICIENCIA VENOSA
0196	TU PIE IZQUIERDO
0245	ALERGIA AL YODO
0297	CERVICITIS
0312	PIEBRE REUMÁTICA
0336	FRACTURA DE HÚMERO
0367	EDEMA AGUDO PULMONAR
0369	ESOFAGITIS
0370	FRACTURA DE COLLETT
0381	COLON IRRITABLE
0423	SINDROME ANSIOSO
0425	SINDROME MULTINFARTO CEREBRAL
0445	SIDA
0446	CRISIS ASMÁTICA

Buscar por:


Diagnóstico:

Código: Numero correlativo.

Descripción: Nombre según su clasificación de los diagnósticos.

Tipos de Estudios

Con esta opción creamos un listado de estudios que por rutina se deben hacer los pacientes, al crear este listado simplificamos el proceso de crear una Orden de Estudio

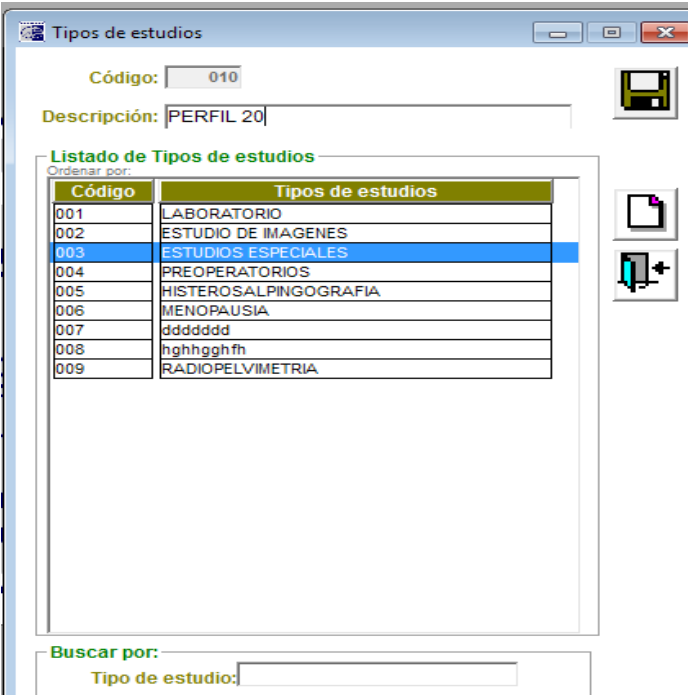


Código	Tipos de estudios
001	LABORATORIO
002	ESTUDIO DE IMAGENES
003	ESTUDIOS ESPECIALES
004	PREOPERATORIOS
005	HISTEROSALPINGOGRAFIA
006	MENOPAUSIA
007	dddddd
008	hghhgghf
009	RADIOPELVIMETRIA

Código: Numero correlativo.

Descripción: nombre con el cual se identifica el Estudio a realizar.

Exámenes

Listado de Exámenes Médicos



Tipo de Estudio: 004 PREOPERATORIOS
 Código: 152
 Descripción: PERFIL 20

Listado de Exámenes/Estudios
Ordenar por:

Código	Examen/Estudio	Tipo de estudio
125	RX DE COLUMNA CERVICAL F Y P	ESTUDIO DE IMAGENES
103	FSH Y ESTRADIOL DIA 21 DE LA REGLA	LABORATORIO
104	CULTIVO DE SECRECION VAGINAL	ESTUDIOS ESPECIALES
130	TESTOSTERONA	LABORATORIO
131	RX DE SENOS PARANASALES	ESTUDIO DE IMAGENES
132	CULTIVO Y ANTIBIOGRAM DE SECRECION NA	LABORATORIO
133	RX DE HOMROS	ESTUDIO DE IMAGENES
134	FTA - ABS	LABORATORIO
135	RADIOPELVIMETRIA	ESTUDIO DE IMAGENES
136	RX DE COLUMNA SACROCOCCIGEA	ESTUDIO DE IMAGENES
137	HBS AG	LABORATORIO
138	VSG	LABORATORIO
139	RX DE ARTICULACION COXOFEMORAL	ESTUDIO DE IMAGENES
140	ECOSONOGRAMA PARTES BLANDAS DE :	ESTUDIO DE IMAGENES
141	DHEA- SO4	LABORATORIO
142	CORTISOL SANGUINEO	LABORATORIO
143	HEPATITIS A B C	LABORATORIO
144	SEROLOGIA PARA HEPATITIS ABC	LABORATORIO
145	LH	LABORATORIO
146	SEROLOGIA PARA DENGUE	LABORATORIO
147	MONOTEST	LABORATORIO
148	TORCH	LABORATORIO
149	CTOMEGALOVIRUS	LABORATORIO
150	HERPES	LABORATORIO
151	RX DE SILLA TURCA	ESTUDIO DE IMAGENES

Buscar por:
 Exámenes/Estudios: PT PTT


Tipo de Estudio: Seleccionar de la lista el Tipo de estudio

Código: Numero correlativo.

Descripción: nombre con el cual se identifica el tipo de examen a realizar.

Antecedentes:

Antecedentes Médicos, como alergias, enfermedades congénitas, etc.

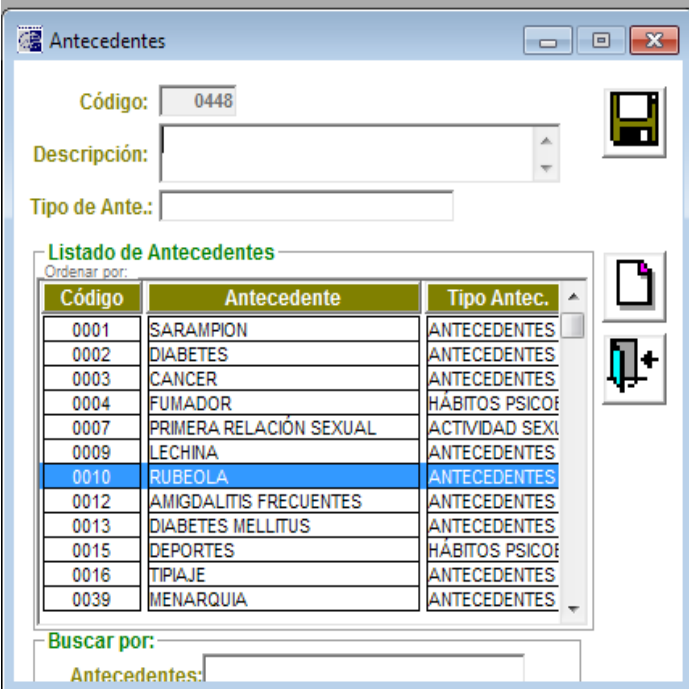

Código	Antecedente	Tipo Antec.
0001	SARAMPION	ANTECEDENTES
0002	DIABETES	ANTECEDENTES
0003	CANCER	ANTECEDENTES
0004	FUMADOR	HÁBITOS PSICOE
0007	PRIMERA RELACIÓN SEXUAL	ACTIVIDAD SEXI
0009	LECHINA	ANTECEDENTES
0010	RUBEOLA	ANTECEDENTES
0012	AMIGDALITIS FRECUENTES	ANTECEDENTES
0013	DIABETES MELLITUS	ANTECEDENTES
0015	DEPORTES	HÁBITOS PSICOE
0016	TIPIAJE	ANTECEDENTES
0039	MENARQUIA	ANTECEDENTES


Código: Numero correlativo.

Descripción: nombre con el cual se identifica el tipo de antecedente.

Tipo de Antecedente: Indicar el tipo de Antecedente

Médicos

En esta opción podemos crear listados de Médicos, en el momento de referir un paciente con otro especialista

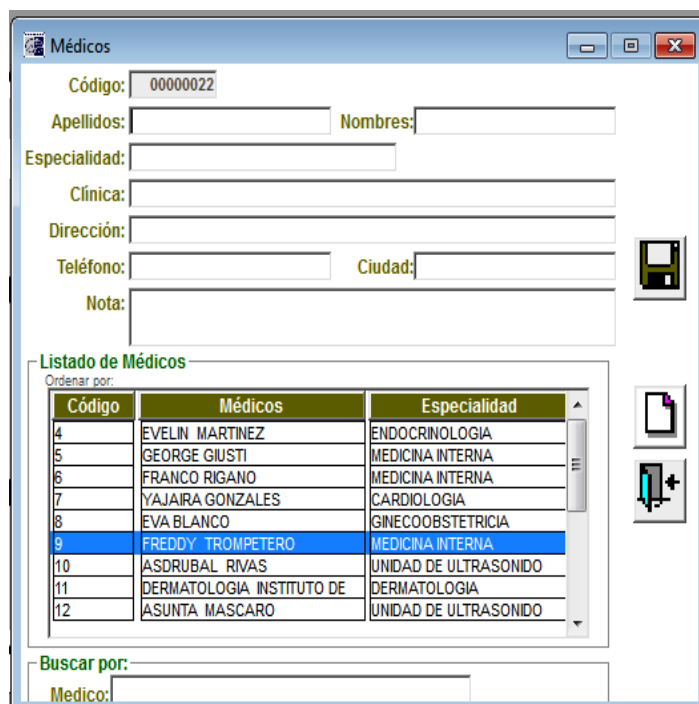

Médicos

Código: 0000022

Apellidos: Nombres:

Especialidad:

Clínica:

Dirección:

Teléfono: Ciudad:

Nota:

Listado de Médicos

Ordenar por:

Código	Médicos	Especialidad
4	EVELIN MARTINEZ	ENDOCRINOLOGIA
5	GEORGE GIUSTI	MEDICINA INTERNA
6	FRANCO RIGANO	MEDICINA INTERNA
7	YAJAIRA GONZALES	CARDIOLOGIA
8	EVA BLANCO	GINECOOBSTETRICIA
9	FREDDY TROMPETERO	MEDICINA INTERNA
10	ASDRUBAL RIVAS	UNIDAD DE ULTRASONIDO
11	DERMATOLOGIA INSTITUTO DE	DERMATOLOGIA
12	ASUNTA MASCARO	UNIDAD DE ULTRASONIDO

Buscar por:

Medico:

Código: Numero correlativo.

Apellidos: Ingresar Apellidos del Médico.

Nombres: Ingresar el nombre del médico.

Especialidad: Especialidad Médica a la cual se dedica el Doctor.

Clínica: Nombre de la Clínica en la cual atiende a los pacientes.


Dirección: Dirección de la clínica o donde esté ubicado su consultorio.

Teléfonos: Ingresar número telefónico de ubicación

Ciudad: Ciudad y estado donde encuentra.

Vandemecum

En esta ventana podemos cargar los Vandemecum, Nombre de Medicamentos y su Nombre Genérico

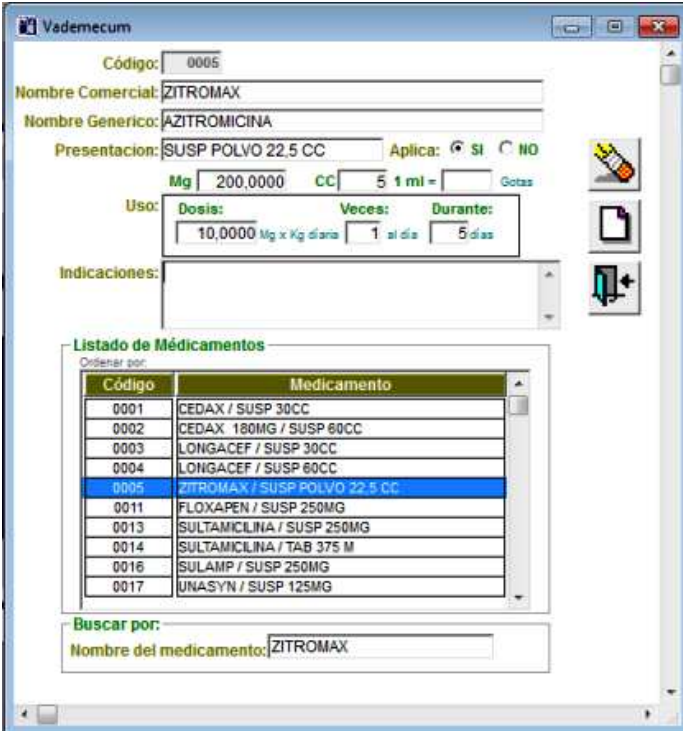

The screenshot shows a software window titled "Vandemecum" with the following fields and data:

- Código:** 0005
- Nombre Comercial:** ZITROMAX
- Nombre Genérico:** AZITROMICINA
- Presentación:** SUSP POLVO 22.5 CC. **Aplica:** SI NO
- Mg:** 200,0000 **CC:** 5 1 ml = Gotas
- Uso:**
 - Dosis:** 10,0000 Mg x Kg diaria
 - Veces:** 1 al día
 - Durante:** 5 días
- Indicaciones:** (Empty text area)
- Listado de Medicamentos:**

Código	Medicamento
0001	CEDAX / SUSP 30CC
0002	CEDAX 180MG / SUSP 60CC
0003	LONGACEF / SUSP 30CC
0004	LONGACEF / SUSP 60CC
0005	ZITROMAX / SUSP POLVO 22.5 CC
0011	FLOXAPEN / SUSP 250MG
0013	SULTAMICILINA / SUSP 250MG
0014	SULTAMICILINA / TAB 375 M
0016	SULAMP / SUSP 250MG
0017	UNASYN / SUSP 125MG
- Buscar por:**
 - Nombre del medicamento:** ZITROMAX

Código: Numero correlativo.

Nombre Comercial: Nombre identificado con el Laboratorio fabricante


Nombre Genérico: Nombre Genérico del medicamento

Presentación: Indicar si la presentación es en Capsulas, Jarabe, Gotas, etc

Indicaciones: Indicar Cantidad a medicar y tiempo de entre tomas

Elementos de Facturación

En esta ventana podemos cargar los Conceptos a Facturar con monto en Bolívares fuertes

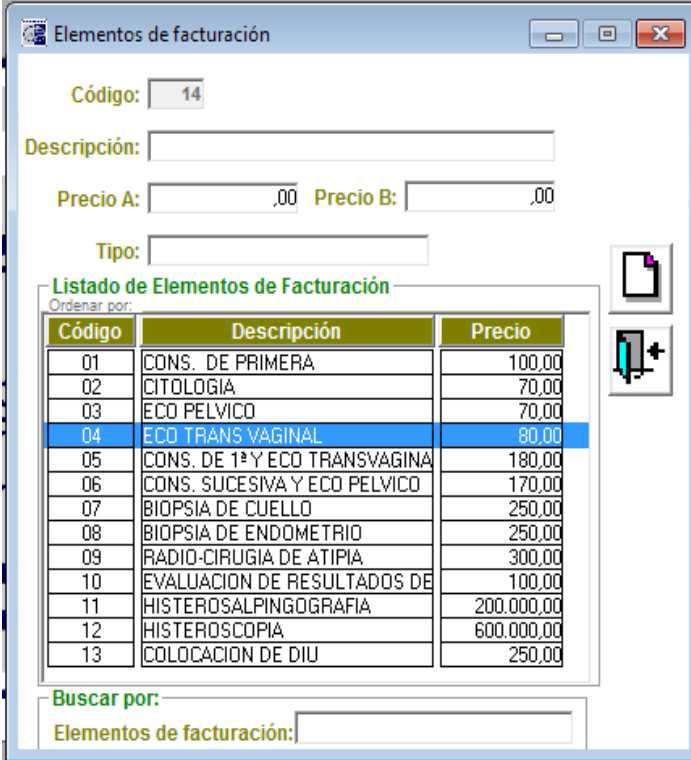

The screenshot shows a software window titled "Elementos de facturación". At the top, there are input fields for "Código:" (value: 14), "Descripción:", "Precio A:" (value: .00), "Precio B:" (value: .00), and "Tipo:". Below these is a section titled "Listado de Elementos de Facturación" with a sub-label "Ordenar por:". It contains a table with 13 rows. The row with code "04" and description "ECO TRANS VAGINAL" is highlighted in blue. Below the table is a search field labeled "Buscar por:" and "Elementos de facturación:".

Código	Descripción	Precio
01	CONS. DE PRIMERA	100,00
02	CITOLOGIA	70,00
03	ECO PELVICO	70,00
04	ECO TRANS VAGINAL	80,00
05	CONS. DE 1ª Y ECO TRANSVAGINA	180,00
06	CONS. SUCESIVA Y ECO PELVICO	170,00
07	BIOPSIA DE CUELLO	250,00
08	BIOPSIA DE ENDOMETRIO	250,00
09	RADIO-CIRUGIA DE ATIPIA	300,00
10	EVALUACION DE RESULTADOS DE	100,00
11	HISTEROSALPINGOGRAFIA	200.000,00
12	HISTEROSCOPIA	600.000,00
13	COLOCACION DE DIU	250,00

Código: Numero correlativo.


Descripción: Concepto de ítem de Factura, por ejemplo: Consulta

Precio: Indicar el valor en la moneda local del precio de consulta.

Tipo: indicar tipo de elemento a facturar.

Intervenciones

Crear servicios para facturar o presupuestar una intervención quirúrgica.

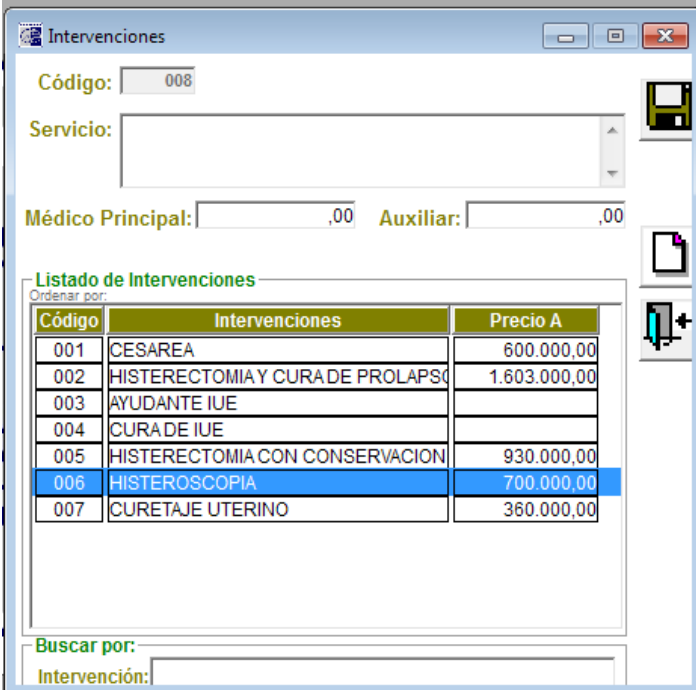


Código	Intervenciones	Precio A
001	CESAREA	600.000,00
002	HISTERECTOMIA Y CURA DE PROLAPSO	1.603.000,00
003	AYUDANTE IUE	
004	CURA DE IUE	
005	HISTERECTOMIA CON CONSERVACION	930.000,00
006	HISTEROSCOPIA	700.000,00
007	CURETAJE UTERINO	360.000,00

Código: Numero correlativo.

Servicio: Descripción del Servicio de intervención quirúrgica.

Razón de Cita

Cada paciente acude a consulta por una causa diferente, en esta opción podemos crear el listado de Motivos a ser utilizados posteriormente en la Historia Médica.

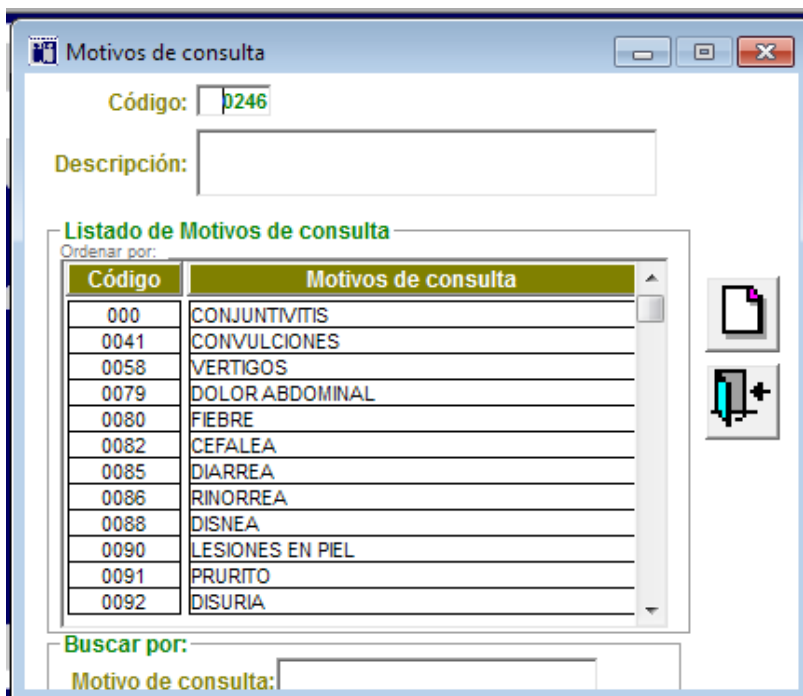

Motivos de consulta

Código: 0246

Descripción:

Listado de Motivos de consulta

Ordenar por:

Código	Motivos de consulta
000	CONJUNTIVITIS
0041	CONVULSIONES
0058	VERTIGOS
0079	DOLOR ABDOMINAL
0080	FIEBRE
0082	CEFALEA
0085	DIARREA
0086	RINORREA
0088	DISNEA
0090	LESIONES EN PIEL
0091	PRURITO
0092	DISURIA

Buscar por:

Motivo de consulta:


Código: Numero correlativo.

Descripción: Concepto del Motivo de Consulta.

Plantillas:

Para Crear Plantillas, que posteriormente podemos utilizar en la Historia Médica

Solo debemos indicar los datos solicitados;

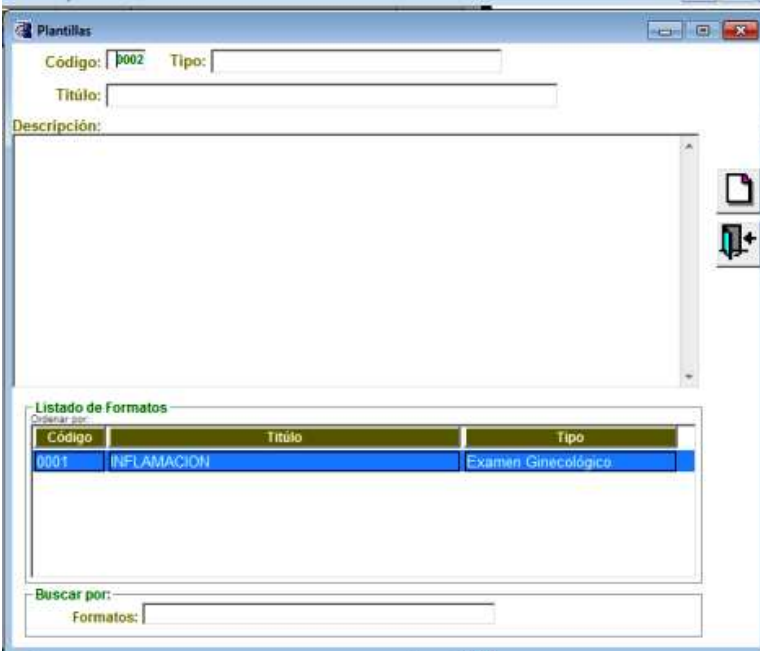

Código	Título	Tipo
0001	INFLAMACION	Examen Ginecológica


Código: Numero correlativo.

Tipo: Enfermedad Actual, Evolución, Citología, Informe Médico, Alergias, Exámenes en General, Estudio Físico

Titulo: Concepto

¿Como configurar Formatos?

Para configurar los Formatos y Personalizar los récipes, debemos realizar la siguiente configuración:
Ingresar en el Submenú Misceláneos, luego hacer click en Configuración

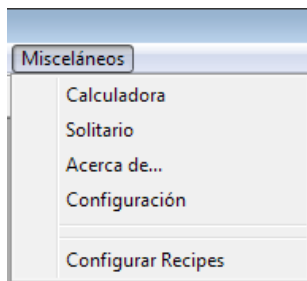


El sistema nos presentará la siguiente pantalla:

Datos Especialidad: UROLOGIA Ciudad: CARACAS R.I.F.: R.I.F.: V - 4065030		 Logo  Guardar  Salir
Pie de página del Recipe Descripción 1 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) CENTRO UROLOGICO DEL ESTE. AV. ROMULO GALLEGOS CONSULTORIO 12 LOS DOS C Descripción 2 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30 Descripción 3 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drdugarte@yahoo.es		
Pie de página de Informes Descripción 1 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) CENTRO UROLOGICO DEL ESTE. AV. ROMULO GALLEGOS CONSULTORIO 12 LOS DOS CAMINOS Descripción 2 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30 AM		



Para Cargar el Logo, el cual generalmente es una imagen de formato: jpg, jpeg, gif o bmp, hacemos

click en  y seguimos los pasos requeridos por el sistema:

Inmediatamente aparece la pantalla para seleccionar el archivo, los ubicamos y hacemos click en Abrir.



Al cargar la imagen, la configuración quedará de la siguiente manera:

Datos Especialidad: CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA Ciudad: CIUDAD GUAYANA R.I.F.: R.I.F.: V - 4065030		 Logo  Guardar  Salir Actualización
Pie de página del Recine Descripción 1 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) CENTRO UROLOGICO DEL ESTE AV ROMULO GALLEGOS CONSULTORIO NRO. 12 Descripción 2 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30 Descripción 3 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drdugarte@yahoo.es		
Pie de página de Informes Descripción 1 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10 Descripción 2 (Dirección - Teléfono - E-mail - Consultas) CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30 AM		


Completar los datos solicitados en la Pantalla y hacer click




en

Hacer click en Misceláneos, inmediatamente se despliega la pantalla:

Y Seleccionamos **Configurar Récpes**

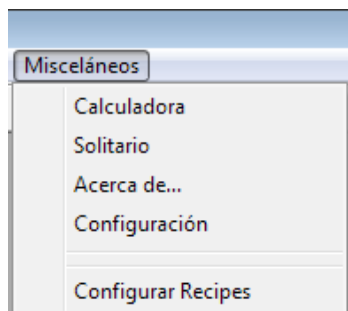

Contamos con cinco (5) opciones para optimizar nuestros récpes y personalizarlos:

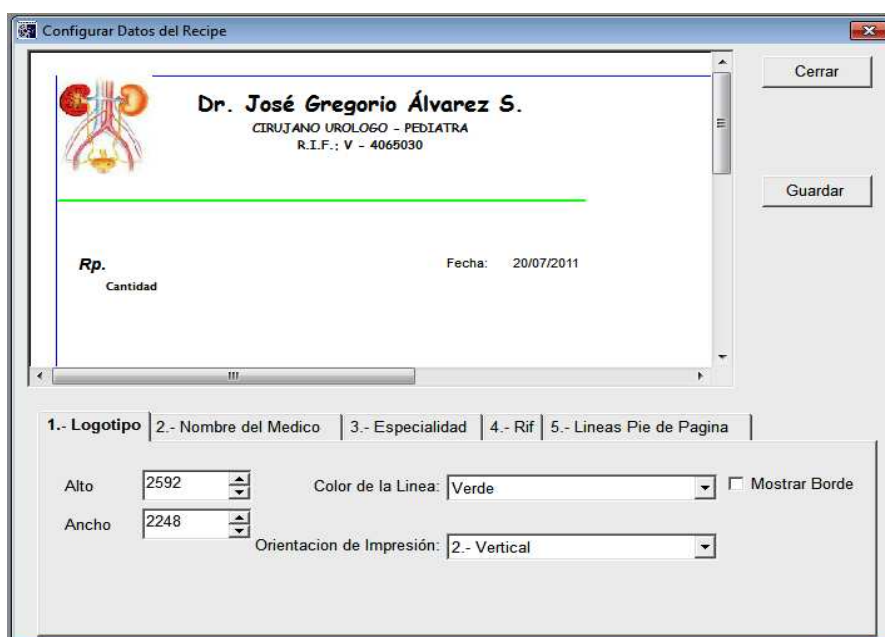

Logotipo

Alto: Indicamos la altura en pixeles de la imagen la cual es el logotipo.

Ancho: Indicamos el ancho en pixeles de la imagen la cual es el logotipo.

Color de la línea: elegir de la lista el color de preferencia que separa el encabezado del récpce.

Orientación de la impresión: Indicar la orientación de la página; horizontal o vertical.


Mostrar Borde: Tildar si deseamos que el récpce este demarcado por un cuadro.

Nombre de Médico

Tipo de Letra: Indicar el tipo de Letra con el cual deseamos sea impreso el nombre del médico.

Alineación del Texto: Indicar si queremos que el nombre quede justificado a la izquierda, derecho o centrado.


Tildar las opciones deseadas: Negrita, Cursiva y/o Subrayado

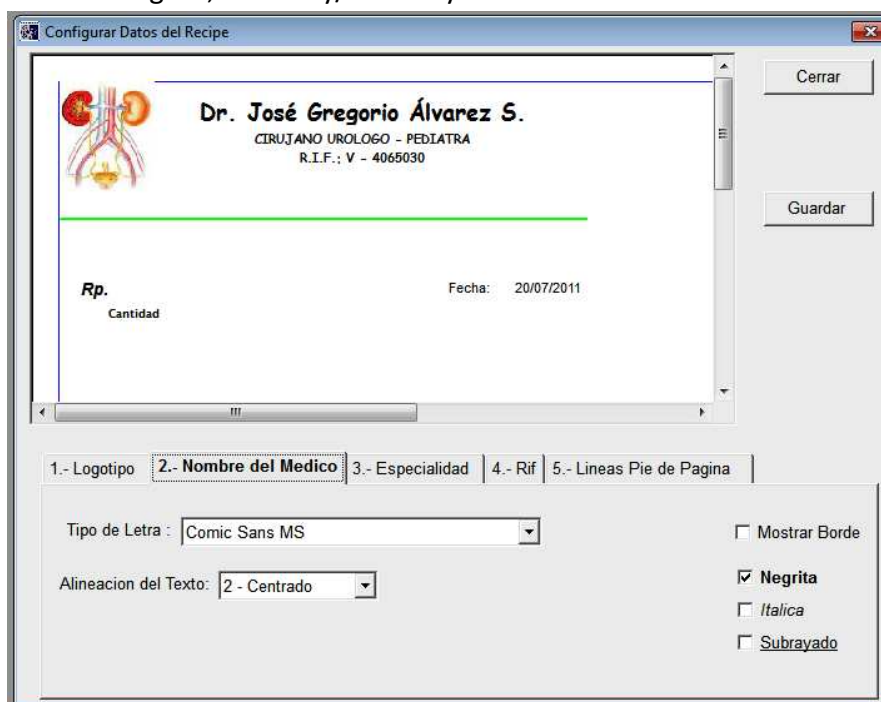

Igualmente Seleccionamos estas Opciones en las pestañas de:


- Especialidad
- RIF
- Líneas pie de página

Al hacer cada cambio hacer click en el icono

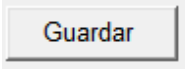

¿Cómo ingresar Nuevos Pacientes?

Para registrar un paciente por primera vez, vaya al menú “Consultas” y seleccione “Nuevo Paciente”.

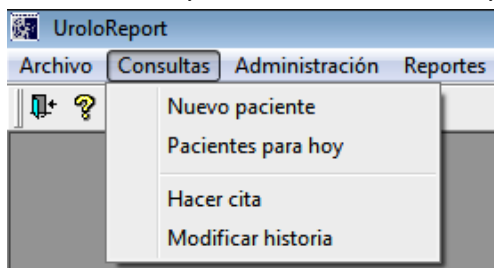

Esta opción le permitirá incluir un nuevo paciente en la base de datos de su programa y presentará la siguiente ventana en la cual puede colocar los datos básicos de su paciente.



Cédula: Número de Identificación, cédula de identidad del Paciente.

Apellidos: Ingresar el Apellidos del Paciente.

Nombres: Ingresar el Nombres del Paciente.

Nacimiento.: Fecha de Nacimiento del Paciente.

Lugar de Nac.: Lugar de Nacimiento, Ciudad o población.

Dirección: Dirección de Residencia.

Celular: Número de teléfono Móvil

Telf.: Número de teléfono de habitación.

E-mail: Correo Electrónico de contacto

Profesión: Profesión o título obtenido

Ocupación: Actividad económica a la cual se dedica.

Est. Civil: Seleccionar el Estado Civil de la lista.

Sexo: Femenino o Masculino.

Seguro/E: Empresa Aseguradora.




Si usted ha terminado de cargar los datos de su paciente deberá presionar el botón de guardar para que los datos sean almacenados. Una vez presionado dicho botón el programa le preguntara ¿Atenderá a este Paciente hoy?

Si responde afirmativamente el paciente pasa a la lista de pacientes para el día y el programa le dará a escoger la razón de la consulta. Si responde negativamente los datos del paciente son almacenados para una posterior consulta. La lista de razones de consulta podrá ser modificada por usted desde el menú Archivo, Razón Cita.

1.- Atender Paciente de Una vez (si) Pacientes para Hoy y entra a la historia medica

Seguidamente el programa le preguntará: ¿Quieres ir Directamente a la Historia Médica? Si responde afirmativamente se abrirá la ventana de la historia médica del paciente. Si responde negativamente los el paciente permanece en lista de pacientes para el día hasta que sea atendido.

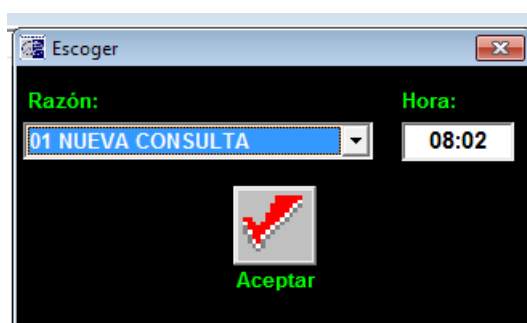

La pantalla de Historia Médica es la siguiente:

Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, 45 Años, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha de la consulta: 19/07/2011

Datos personales

Cédula: Fecha: 10/07/2011 Historia:

Apellidos: VELASQUEZ JUNCAL Nombres: LUIS CARLOS

Nacimiento: 12/01/1966 Lugar de Nac.: CARACAS

Dirección: LOS CHORROS AV. PPAL. EDIF. JUAREZS PISO

Celular: 04145478965 Telf.: 02122665478

E-mail: luisvelasquez@yahoo.com

Profesión: LIC EN ADMINISTRACION

Ocupación: ADMINISTRADOR Referido:

Est. Civil: Casado(a) Sexo: Masculino Femenino

Seguro/E.: PARTICULAR

VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS
Consulta #1
Historia # 00002
Edad: 45 Años

urolo report

2.- Si la respuesta es NO. Pasa a la lista de espera por atender, queda el paciente en la lista de espera por atender


Pacientes a Atender Hoy 18/07/2011 Por el (la) Dra. Geritza M. Urdaneta de Suarez

Médico: 1 Geritza M. Urdaneta de Suarez Fecha: 18/07/2011


1	Hora	Historia	Nombre del Paciente	Estado	Razón	Celular
1	08:30 a.m.	00002	JOHAN ELY VARGAS MARQUEZ	Atendido	NUEVA CONSULTA	041625787945

¿Cómo cargar una consulta sucesiva?

Si su paciente tiene historia médica registrada y llega para ser atendido en consulta puede agregarlo a la lista de pacientes del día seleccionando la opción **Pacientes para hoy** del menú Consultas.

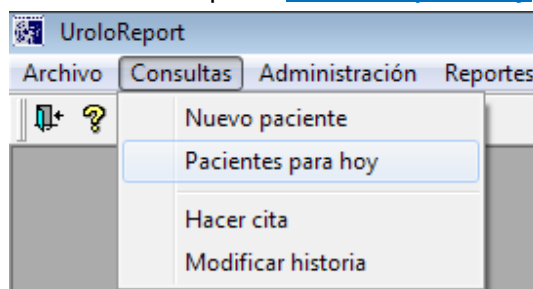

Posteriormente se abre la ventana siguiente donde se presentan varias opciones.

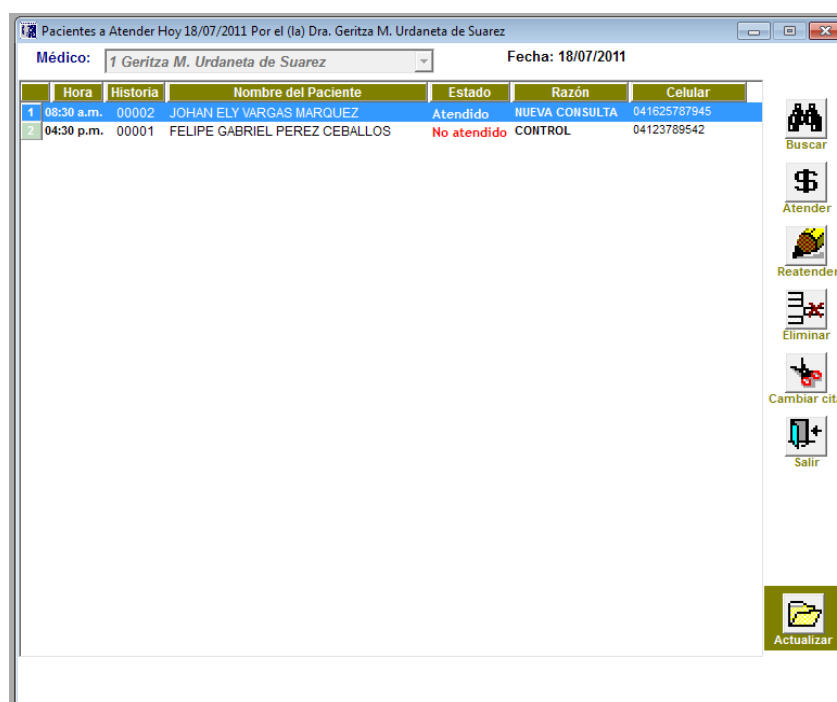

El botón **Atender** le permite acceder a la historia del Paciente


El botón **Reatender** le permite re-abrir la historia médica de un paciente que se ha atendido.

El botón **Eliminar** le permite eliminar un paciente de la lista de pacientes para el día, siempre que esté presente el estado de “no atendido”. Esta opción no borrará la historia del paciente, sólo eliminará la cita que tiene para el día de consulta.

El botón **Salir** cerrará la ventana de Pacientes del día.


El botón **Buscar** le permitirá seleccionar un paciente del listado almacenado en el programa para que sea agregado a la lista de pacientes del día.

La Pantalla para búsqueda de pacientes es La siguiente:

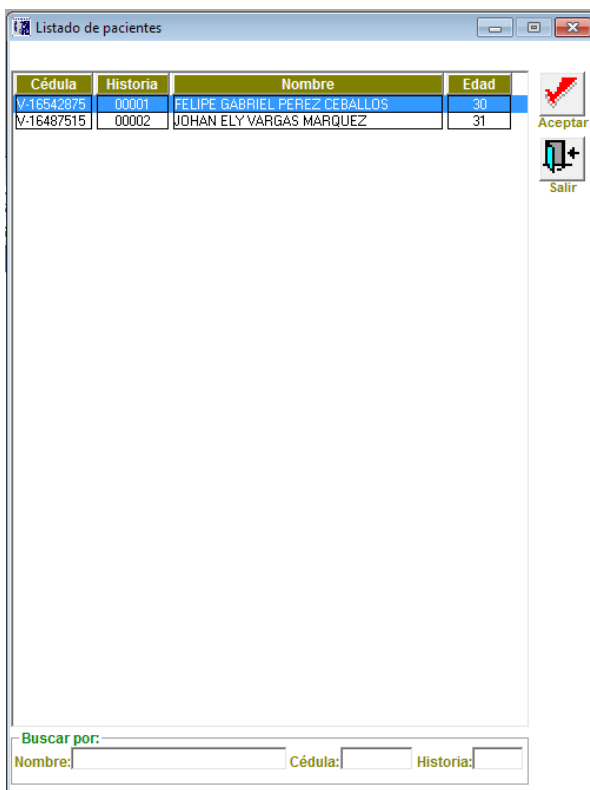


Seleccionar el Paciente a Atender y hacer click en Aceptar. También se puede realizar la búsqueda usando los criterios de: Nombre de Paciente, Numero de Cedula, Numero de Historia.

En el indicador de estado se muestra el status de **Atendido** o **No Atendido** como recordatorio de los Pacientes del día.

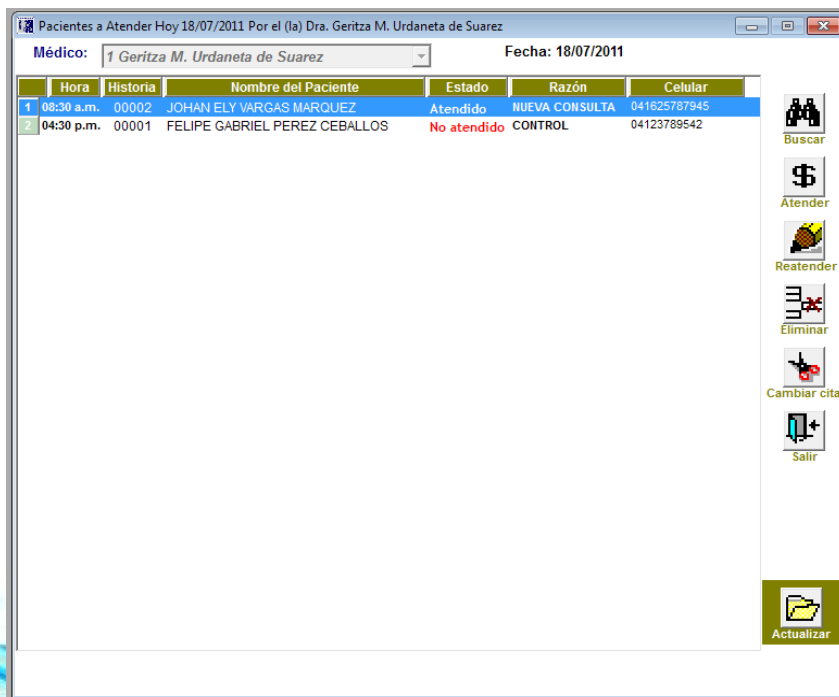

En el caso que sea más de una Consulta del mismo Paciente la Pantalla de historia médica se presentara así:

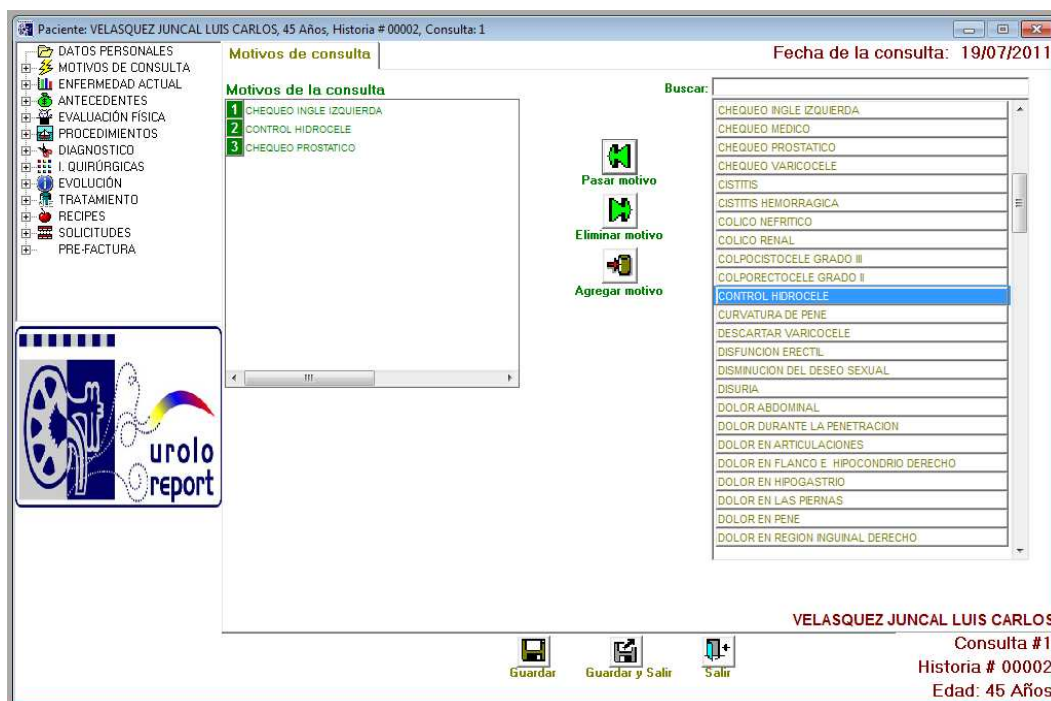


En la esquina inferior derecha indica el Nro. De consulta que estamos atendiendo o consultando, a su izquierda podemos detallar el Navegador entre consultas y consultar cualquiera de ellas.

¿Como llenar la Historia Médica?

Una vez que se abre la historia médica siguiendo los pasos antes descritos se despliega la siguiente ventana la cual presenta un menú en la parte izquierda, el cual se ha dispuesto en la secuencia de llenado de una historia médica regular.

Motivo de Consulta

Puede ir seleccionando los diferentes ítems de la historia conforme va realizando la consulta de su paciente.

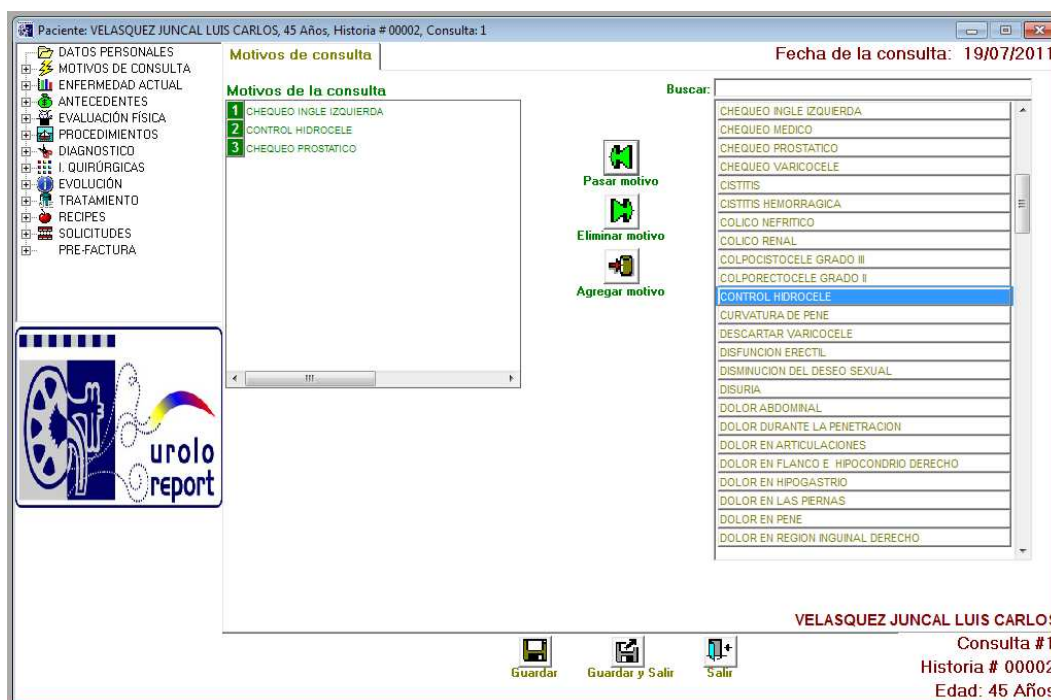

El ítem MOTIVOS DE CONSULTA se presenta una lista de la cual usted podrá seleccionar el motivo por el cual su paciente llega a consulta, para esto puede buscar el motivo desplazándose por la lista utilizando el mouse de su computador o puede comenzar a tipear el motivo en el campo Buscar, el cual filtrará los posibles motivos dependiendo el texto escrito. Para colocar un motivo de consulta puede hacerlo con doble clic del mouse ó seleccionándolo y presionando el botón Pasar



Motivo **Pasar motivo**. Puede agregar múltiples motivos de consulta o agregar sus propios motivos



personalizados mediante el botón Agregar motivo **Agregar motivo**. Si usted desea eliminar un motivo que




haya seleccionado con anterioridad puede utilizar el botón Eliminar Motivo **Eliminar motivo**. Esto no eliminará el motivo de la base de datos.




Enfermedad Actual


El ítem ENFERMEDAD ACTUAL, usted podrá vaciar la información referente a la sintomatología de su paciente y puede realizarlo abiertamente ó seleccionando una plantilla de la lista de plantillas que se presentan a la derecha de la ventana. Estas plantillas pueden ser agregadas y/o modificadas por usted desde el menú Archivo Plantillas.

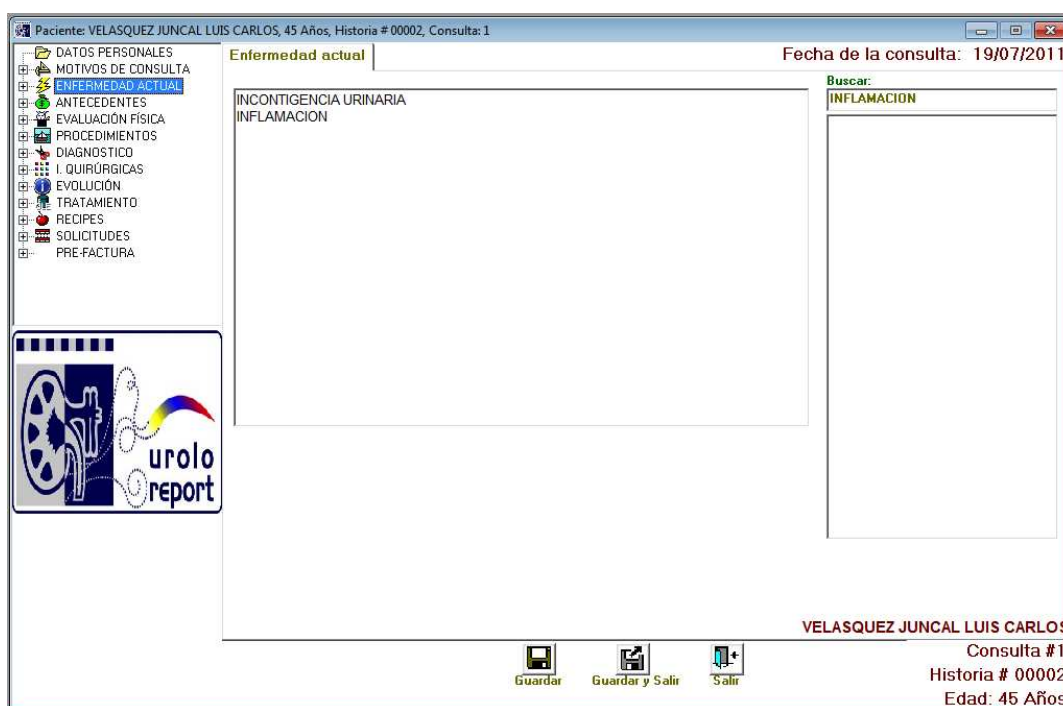


Antecedentes

En el ítem ANTECEDENTES de la historia médica podrá colocar los antecedentes Personales, Familiares y otros de su paciente, esto lo puede realizar seleccionando de la lista el antecedente o puede utilizar el campo Buscar para filtrar los antecedentes.

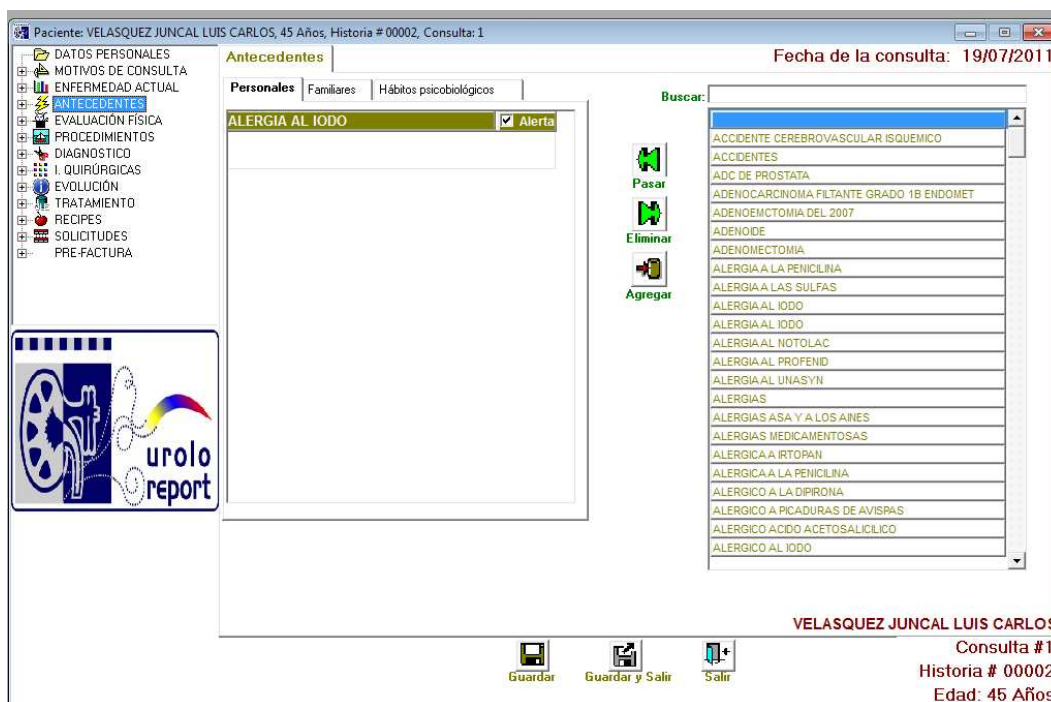

Para colocar un antecedente puede hacerlo con doble clic del mouse ó seleccionándolo y presionando el botón Pasar. Puede agregar múltiples antecedentes o agregar sus propios antecedentes personalizados mediante el botón  Agregar. Si usted desea eliminar un antecedente que haya

seleccionado con anterioridad puede utilizar el botón  Eliminar. Esto no eliminará el antecedente de la base de datos.

Una vez agregado el antecedente se podrán ingresar comentarios adicionales en la casilla inferior al antecedente. Cada antecedente posee una casilla de Alerta, la cual puede ser utilizada para llamar la atención a dicho antecedente en consultas posteriores.

Para agregar antecedentes Familiares, Hábitos Psicobiológicos, Obstétricos, etc., puede hacerlo siguiendo el procedimiento antes descrito.

Evaluación Física


En el ítem EVALUACIÓN FÍSICA se presentan varias pestañas las cuales se ingresarán a continuación.

La pestaña Examen físico, presenta los campos para llenar información relacionada al examen físico practicado a su paciente. Una vez que haya vaciado los diferentes campos presione el botón Actualizar para que se realice un resumen automático de la información colocada. El campo I.M.C. se calcula automáticamente al colocar el Peso y Talla del paciente.

Examen Físico

- **General**

En esta ventana se lleva el control de talla y pesos del paciente por cita médica

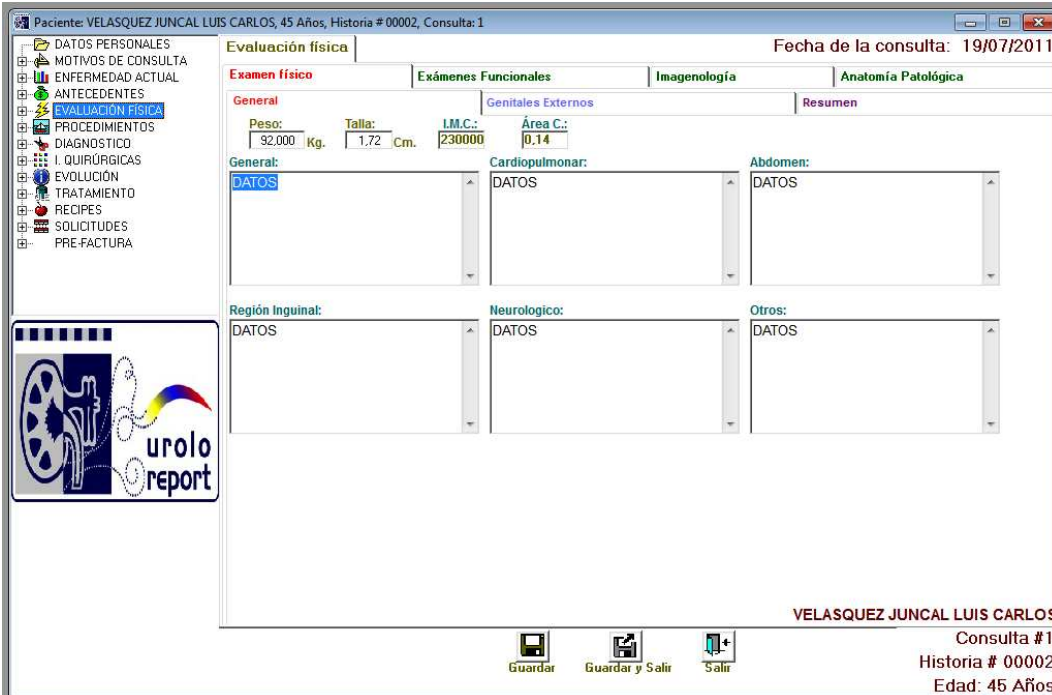


En cada recuadro indicamos los datos correspondientes de las medidas del paciente en la Cita Médica.

Después de incluidos los datos en el sistema podemos obtener los resultados estadísticos

- **Genitales Externos**

- Pene/Escroto

Datos de la Evaluación Física de Los Genitales, empezando con el Pene y el escroto, se registran los datos obtenidos:

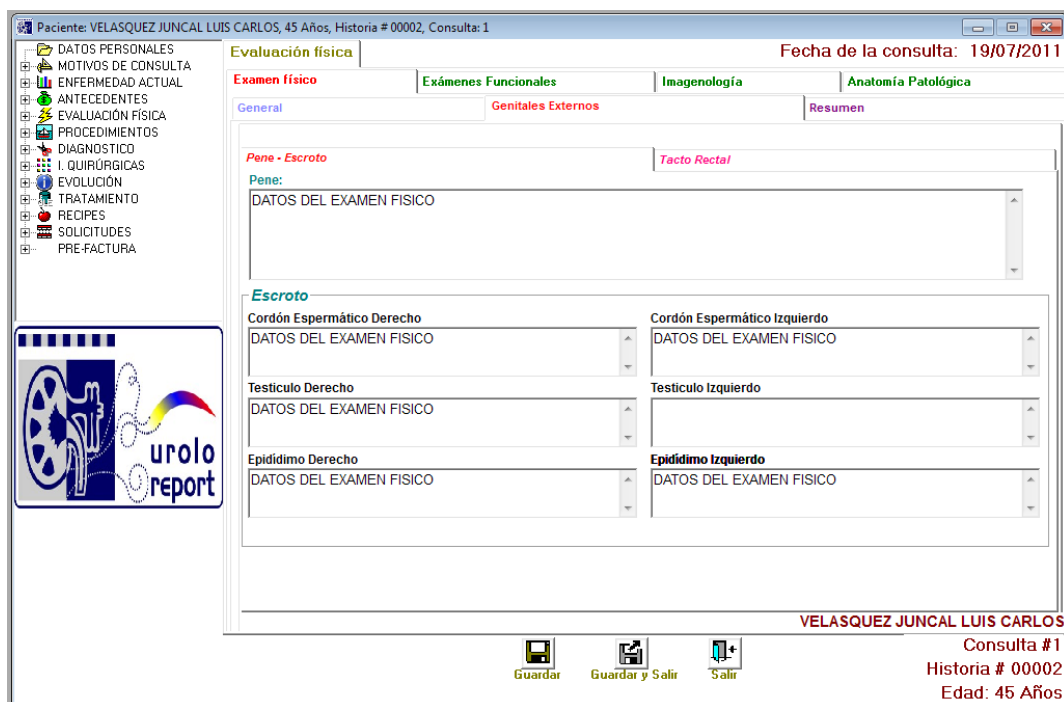

Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, 45 Años, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha de la consulta: 19/07/2011

Evaluación física

Examen físico | Exámenes Funcionales | Imagenología | Anatomía Patológica

General | Genitales Externos | Resumen

Pene - Escroto | Tacto Rectal

Pene:

DATOS DEL EXAMEN FISICO

Escroto


Cordón Espermático Derecho DATOS DEL EXAMEN FISICO	Cordón Espermático Izquierdo DATOS DEL EXAMEN FISICO
Testículo Derecho DATOS DEL EXAMEN FISICO	Testículo Izquierdo DATOS DEL EXAMEN FISICO
Epidídimo Derecho DATOS DEL EXAMEN FISICO	Epidídimo Izquierdo DATOS DEL EXAMEN FISICO

VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS

Consulta #1
Historia # 00002
Edad: 45 Años

Guardar | Guardar y Salir | Salir

- Tacto Rectal

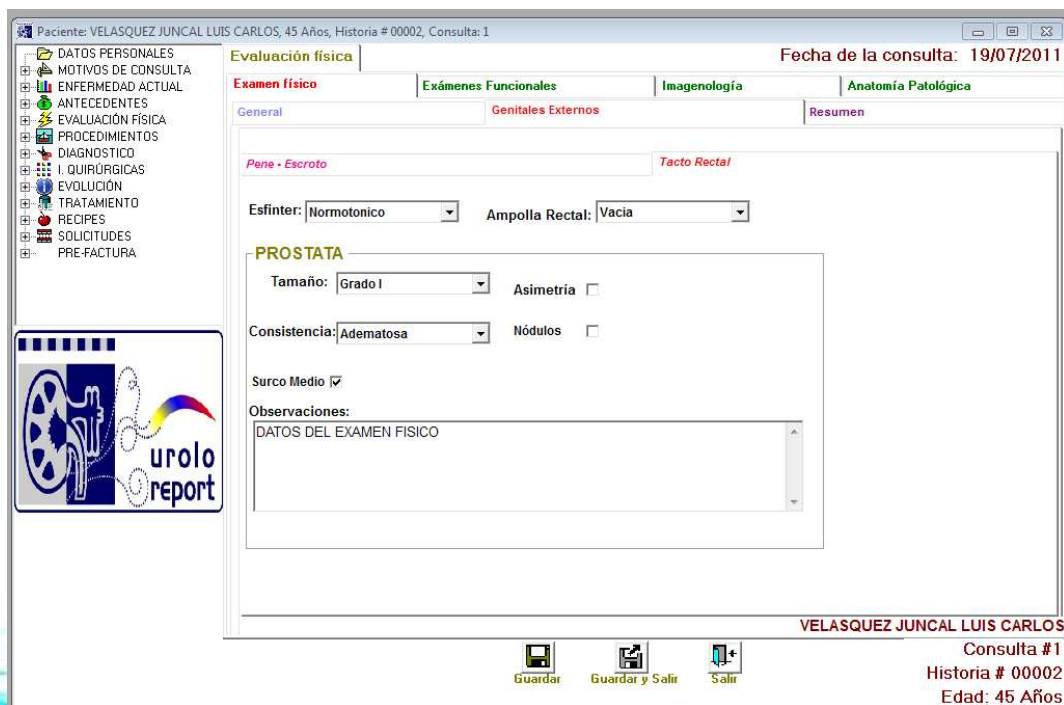

Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, 45 Años, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha de la consulta: 19/07/2011

Evaluación física

Examen físico | Exámenes Funcionales | Imagenología | Anatomía Patológica

General | Genitales Externos | Resumen

Pene - Escroto | Tacto Rectal

Esfínter: Normotonico | Ampolla Rectal: Vacía

PROSTATA

Tamaño: Grado I | Asimetría

Consistencia: Adematosa | Nódulos

Surco Medio

Observaciones:
DATOS DEL EXAMEN FISICO


VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS

Consulta #1
Historia # 00002
Edad: 45 Años

Guardar | Guardar y Salir | Salir


- Resumen

Resultados Obtenidos de los exámenes practicados al paciente: físico, Genitales externos: pene, escroto y tacto rectal:

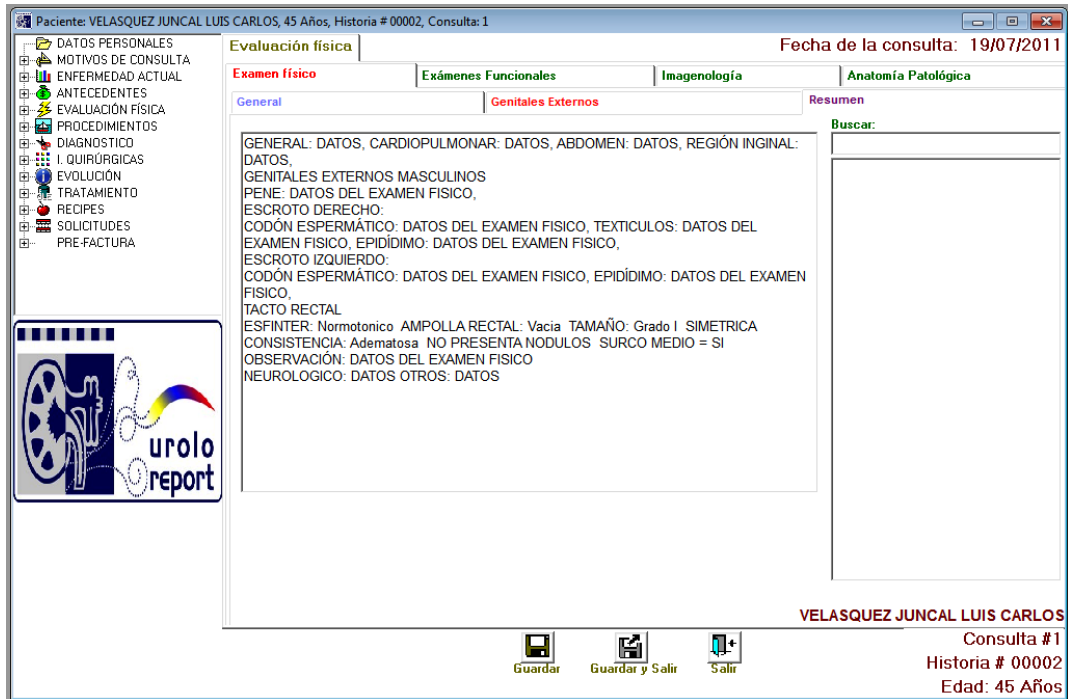

Exámenes Funcionales:


En esta ventana se van a ingresar los datos del examen funcional:

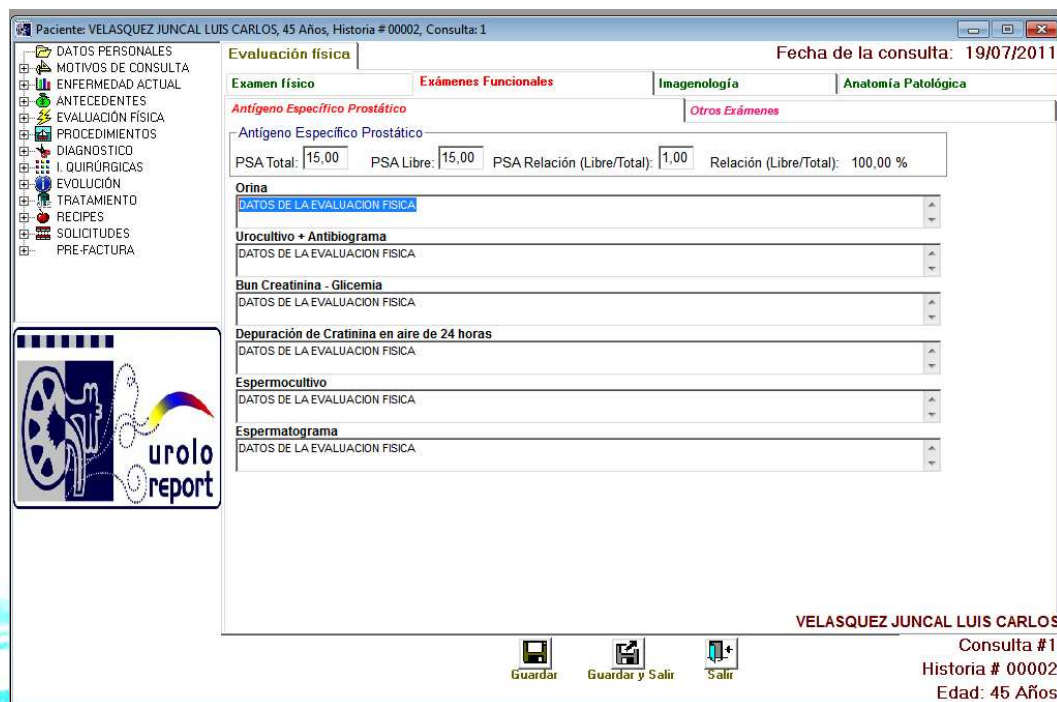


Procedimientos

- **Cistoscopia**

Al examinar el interior de la vejiga y la uretra del paciente podemos llevar el control de este examen en la siguiente ventana:

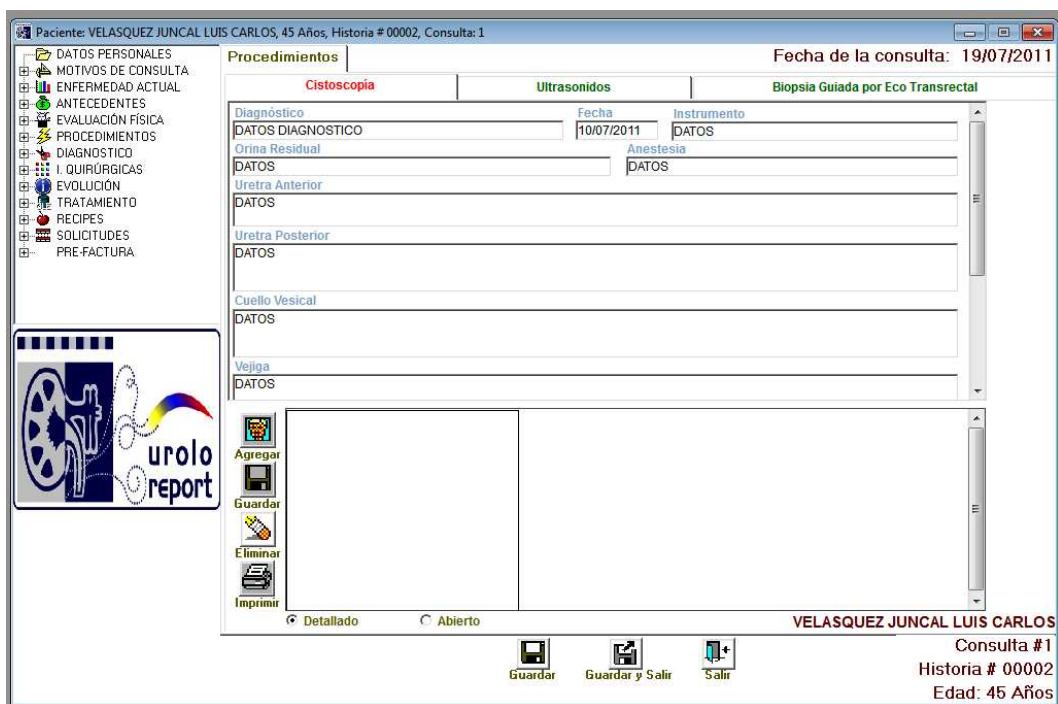


▪ **Ultrasonidos**

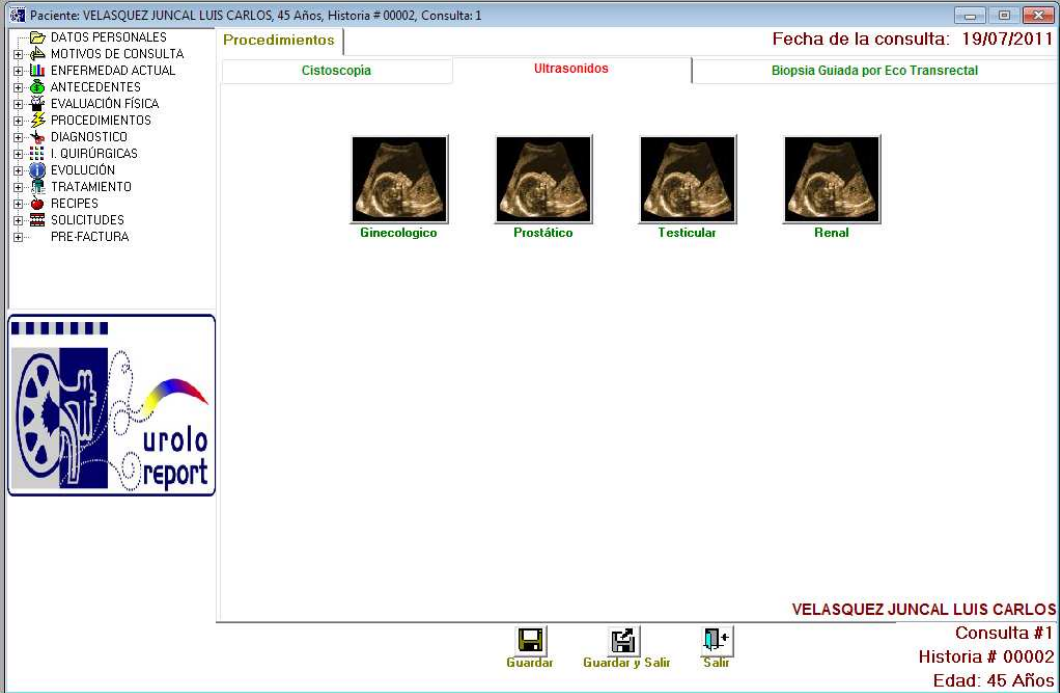

- **Ginecológico**


Esta opción es para ingresar los datos de pacientes a los cuales sea requerido realizar

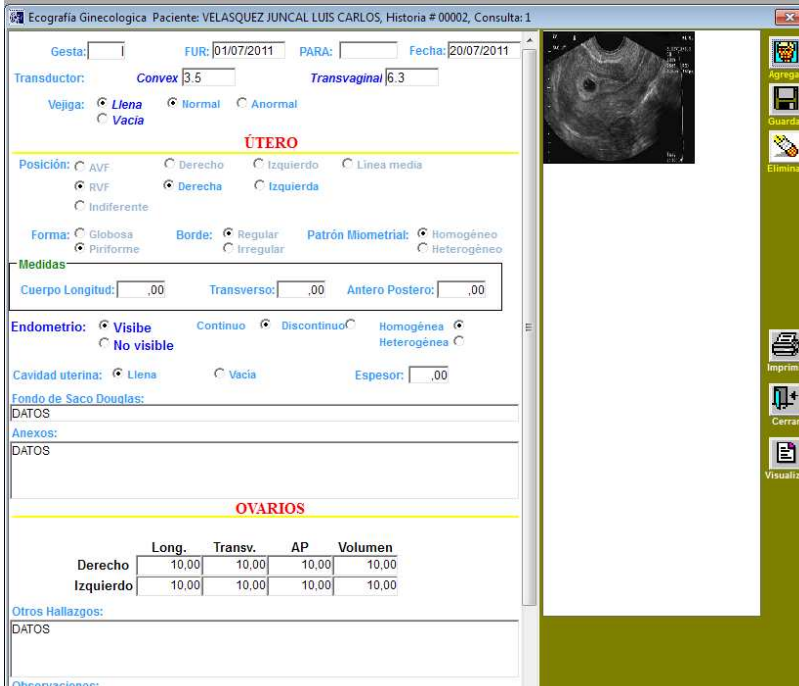

	Long.	Transv.	AP	Volumen
Derecho	10,00	10,00	10,00	10,00
Izquierdo	10,00	10,00	10,00	10,00

Los resultados del Ultrasonido Ginecológico serían así:

Ecografía Ginecológica Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1


Dr. José Gregorio Álvarez S.
 CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA
 R.I.F.: V - 4065030

CIUDAD GUAYANA, 19/07/2011

INFORME ECOSONOGRAFICO GINECOLÓGICO

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL EDAD: 45 años Cédula: 8548965
 FUR: 01/07/2011 GESTA: I PARA:

Transductor: Convex 3.5 Mhz Transvaginal 6.3 Mhz
 Vejiga: Llena Normal Anormal
 Vacía

ÚTERO

Posición: AVF Derecho Izquierdo Línea media
 RVF Derecha Izquierda
 Forma: Globosa Borde: Regular Patrón Miometrial: Homogéneo
 Piriforme Irregular Heterogéneo

Medidas

Cuerpo Longitud: Transverso: Antero Postero:

Endometrio: Visible Continuo Discontinuo Homogénea
 No visible

Cavidad uterina: Llena Vacía Espesor: Heterogénea

Fondo de Saco de Douglas: DATOS


Anexos:
DATOS

OVARIOS

	Long.	Transv.	AP	Volumen
Derecho	10 mm	10 mm	10 mm	010,00 cc

- **Ecografía Prostática**

Al efectuar el ultrasonido de Prostata al Paciente, lo datos son ingresado en la siguiente pantalla:

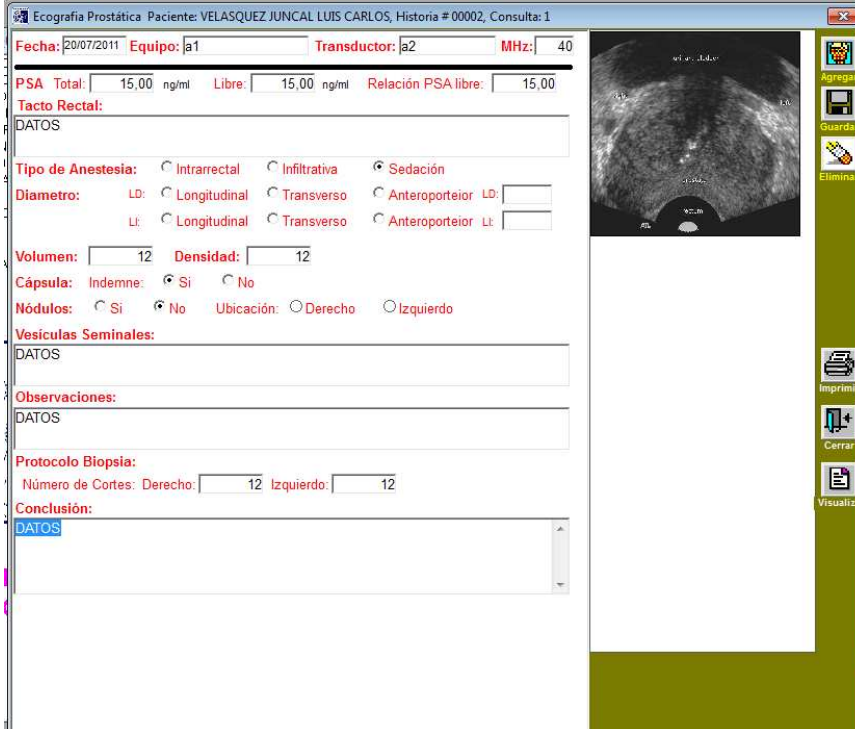

Ecografía Prostática Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha: 20/07/2011 Equipo: a1 Transductor: a2 MHz: 40

PSA Total: 15,00 ng/ml Libre: 15,00 ng/ml Relación PSA libre: 15,00

Tacto Rectal:

DATOS

Tipo de Anestesia: Intrarrectal Infiltrativa Sedación

Diametro: LD: Longitudinal Transverso Anteroposteior LD:
LI: Longitudinal Transverso Anteroposteior LI:

Volumen: 12 Densidad: 12

Cápsula: Indemne: Si No

Nódulos: Si No Ubicación: Derecho Izquierdo

Vesículas Seminales:

DATOS

Observaciones:

DATOS


Protocolo Biopsia:

Número de Cortes: Derecho: 12 Izquierdo: 12

Conclusión:

DATOS

El informe obtenido se presenta así:

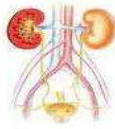

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA

ULTRASONIDO PROSTATICO

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL

Fecha: 20/07/2011

EDAD: 45 años.

Se realiza ultrasonido renal con equipo a1 y transductor a2 de 40 MHz, con los siguientes hallazgos:

PSA Total: 15,00 ng/ml Libre: 15,00 ng/ml Relación PSA libre: 15,00

Tacto Rectal:

DATOS

Tipo de Anestesia: Intrarrectal Infiltrativa Sedación

Diametro: LD: Longitudinal Transverso Anteroportelior

LI: Longitudinal Transverso Anteroportelior

Volumen: 12 Densidad: 12

Cápsula: Indemne: SI No

Nódulos: SI No Ubicación: Derecho Izquierdo

Vesículas Seminales:

DATOS

Observaciones:

DATOS

Protocolo Biopsia:

Número de Cortes: Derecho: 12 Izquierdo: 12

Conclusión:

DATOS


Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30 AM

Ejemplo Informe Ultrasonido Prostático

- **Ecografía Testicular**

Al realizar el ultrasonido en testículos y próstata, la información obtenida se ingresa en su respectiva pantalla:

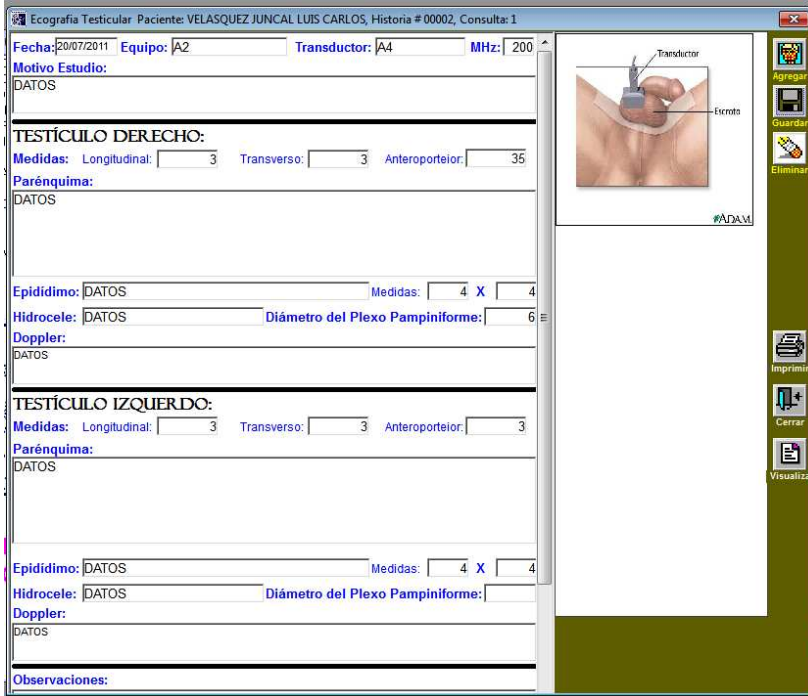

Ecografía Testicular - Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha: 20/07/2011 Equipo: A2 Transductor: A4 MHz: 200

Motivo Estudio:

DATOS

TESTÍCULO DERECHO:

Medidas: Longitudinal: 3 Transverso: 3 Anteroposteior: 35

Parénquima:

DATOS

Epididimo: DATOS Medidas: 4 X 4

Hidrocele: DATOS Diámetro del Plexo Pampiniforme: 6

Doppler:

DATOS

TESTÍCULO IZQUIERDO:

Medidas: Longitudinal: 3 Transverso: 3 Anteroposteior: 3

Parénquima:

DATOS


Epididimo: DATOS Medidas: 4 X 4

Hidrocele: DATOS Diámetro del Plexo Pampiniforme:

Doppler:

DATOS

Observaciones:

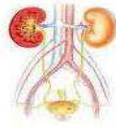

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA

ULTRASONIDO TESTICULAR

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL

Fecha: 20/07/2011

EDAD: 45 años.

Motivo del Estudio:
DATOS

Se realiza ultrasonido renal con equipo A2 y transductor A4 de 200 MHz, con los siguientes hallazgos:

TESTÍCULO DERECHO:

Medidas: Longitudinal: 3 mm Transverso: 3 mm Anteroposterior: 35 mm

Parénquima:
DATOS

Epidídimo: DATOS

Medidas: 4 mm X 4 mm

Hidrocele: DATOS

Diámetro del Plexo Pampiniforme: 6 mm

Doppler:
DATOS

TESTÍCULO IZQUIERDO:

Medidas: Longitudinal: 3 mm Transverso: 3 mm Anteroposterior: 3 mm

Parénquima:
DATOS

Epidídimo: DATOS

Medidas: 4 mm X 4 mm

Hidrocele: DATOS

Diámetro del Plexo Pampiniforme:

Doppler:
DATOS

Observaciones:

Conclusiones:

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30 AM

Ejemplo Informe Ecografía Testicular

- **Ecografía Renal**

Al hacer el examen ecográfico en los Riñones las anotaciones del mismo se pueden ingresar en la pantalla:

Ecografía Renal Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha: 20/07/2011 Equipo: A3 Transductor: A3 MHz: 2500

RIÑÓN DERECHO: Ubicación en su sitio Habitual: Sí No

Medidas: Longitudinal: 5 Transverso: 5 Anteroposterior: 5
Corteza: Características: DATOS Medida: 10

Hallazgos:
LOE: Ubicación: DATOS Medidas: 4 X 4
Litiasis: Sí No ubicación: DATOS medidas: 4 X 4
Microlitiasis: Sí No Dilatación del sistema colector:


RIÑÓN IZQUIERDO: Ubicación en su sitio Habitual: Sí No


Medidas: Longitudinal: 4 Transverso: 4 Anteroposterior: 4
Corteza: Características: DATOS Medida: 9

Hallazgos:
LOE: Ubicación: DATOS Medidas: 6 X 6
Litiasis: Sí No ubicación: DATOS medidas: 6 X 6
Microlitiasis: Sí No Dilatación del sistema colector: DATOS

Observaciones:
DATOS

Conclusión: Hallazgos ecográficos sugestivos de:
DATOS

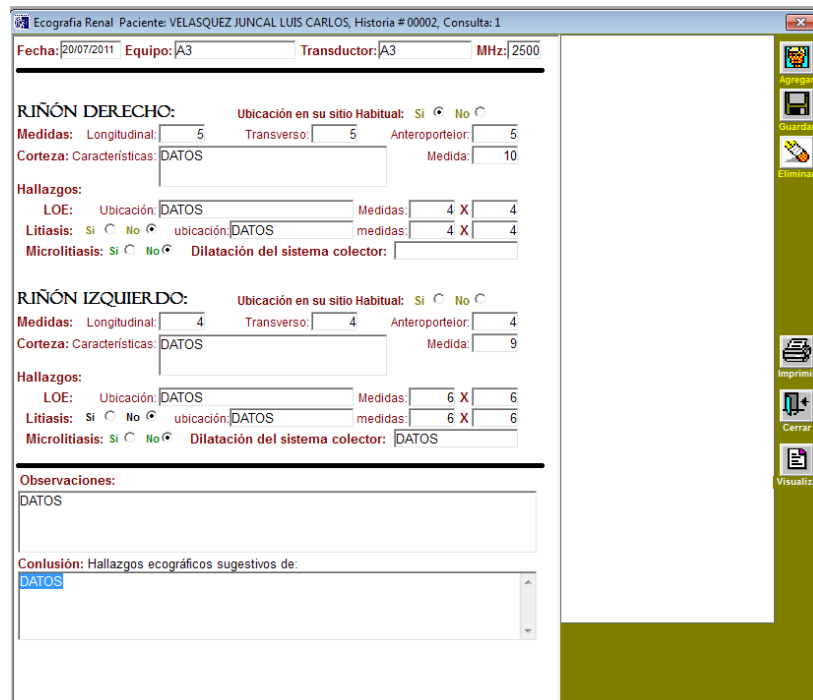

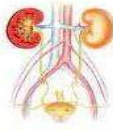

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA

ULTRASONIDO RENAL

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL

Fecha: 20/07/2011

EDAD: 45 años.

Se realiza ultrasonido renal con equipo A3 y transductor A3 de 2500 MHz, con los siguientes hallazgos:

RIÑÓN DERECHO:

Medidas: Longitudinal: 5 mm

Corteza: Características: DATOS

Ubicación en su sitio Habitual: Si No

Transverso: 5 mm

Anteroposterior: 5 mm

Medida: 10 mm

Hallazgos:

LOE: Ubicación: DATOS

Medidas: 4 X 4

Litiasis: Si No ubicación: DATOS

medidas: 4 mm X 4 mm

Microlitiasis: Si No

Dilatación del sistema colector:

RIÑÓN IZQUIERDO:

Medidas: Longitudinal: 4 mm

Corteza: Características: DATOS

Ubicación en su sitio Habitual: Si No

Transverso: 4 mm

Anteroposterior: 4 mm

Medida: 9 mm

Hallazgos:

LOE: Ubicación: DATOS

Medidas: 6 mm X 6 mm

Litiasis: Si No ubicación: DATOS

medidas: 6 mm X 6 mm

Microlitiasis: Si No

Dilatación del sistema colector: DATOS

Observaciones:

DATOS

Conclusión: Hallazgos ecográficos sugestivos de:

DATOS


Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO. 10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30 AM

Ejemplo Ultrasonido Renal


- **Biopsia guiada por eco transrectal**

Los resultados de estudio se ingresarán en la pantalla:

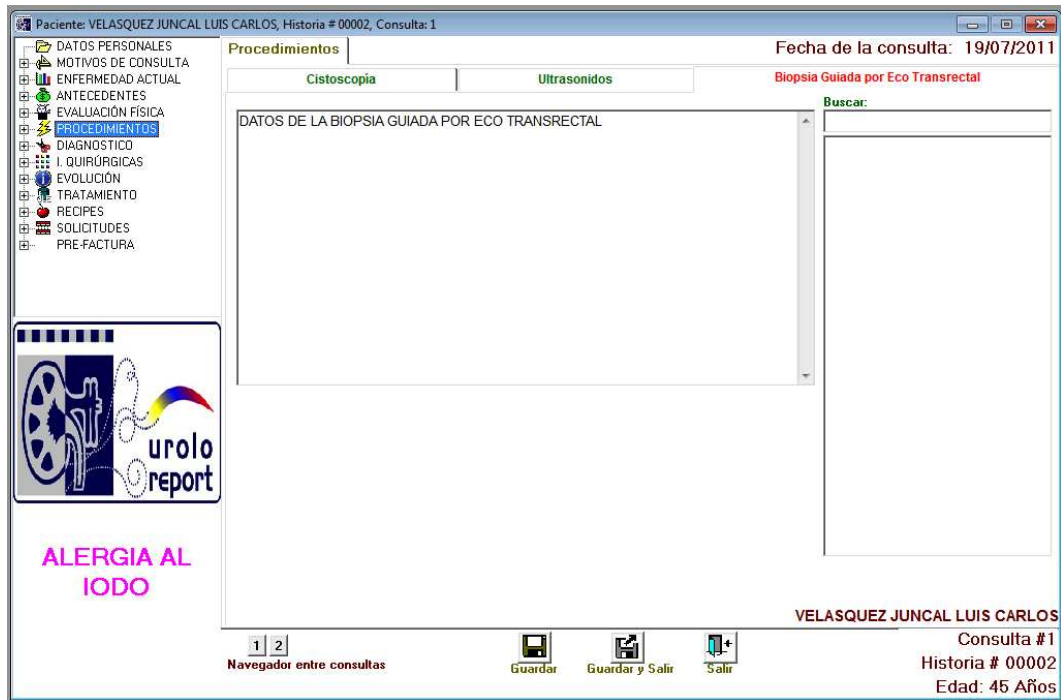

Diagnostico

En el ítem DIAGNÓSTICO, se presentará una ventana similar a la descrita antes como MOTIVO DE CONSULTA, la cual puede ser llenada de manera similar, donde se podrá indicar el diagnostico del paciente, según la evaluación médica :



Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1
 Fecha de la consulta: 19/07/2011

Diagnostico
Diagnosticos de la consulta

- 1 COLON IRRITABLE
- 2 ESCROTO AGUDO
- 3 ENFERMEDAD QUISTICA RENAL BILATERAL

Buscar:

DOLOR TESTICULAR
DONANTE RENAL
ECTASIA SEVERO PIELON SUPERIOR DERECHO ACCB
ECTOPIA DE LA MUCOSA URETRAL
EMBARAZO
EMBARAZO DE 4 SEMANAS
EN RAO
ENDOMETRIOSIS PELVICA
ENFERMEDAD DE PEYRONIE
ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA
ENFERMEDAD POLIQUISTICA
ENFERMEDAD QUISTICA RENAL BILATERAL
ENFERMEDAD QUISTICA RENAL DERECHA
EPIDIDIMITIS
EPIDIDIMITIS BILATERAL
EPIDIDIMITIS DERECHA
EPIDIDIMITIS IZQUIERDA
EPIDIDIMO ORQUITIS DERECHA
EPISTAXIS
EPISTAXIS ANTERIOR UNILATERAL
ESCLEROSIS DE CUELLO VESICAL
ESCROTO AGUDO
ESTENOSIS DE LA UNION URETRO VESICAL
ESTENOSIS DE LA UNION URETROVESICAL

Pasa diag.
 Eliminar
 Agregar


urolo report
ALERGIA AL IODO

VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS
 Consulta #1
 Historia # 00002
 Edad: 45 Años

1 2
 Navegador entre consultas
 Guardar Guardar y Salir Salir

I. Quirúrgicas

Ingresar Datos de las intervenciones quirúrgicas a los cuales ha sido sometido el Paciente:

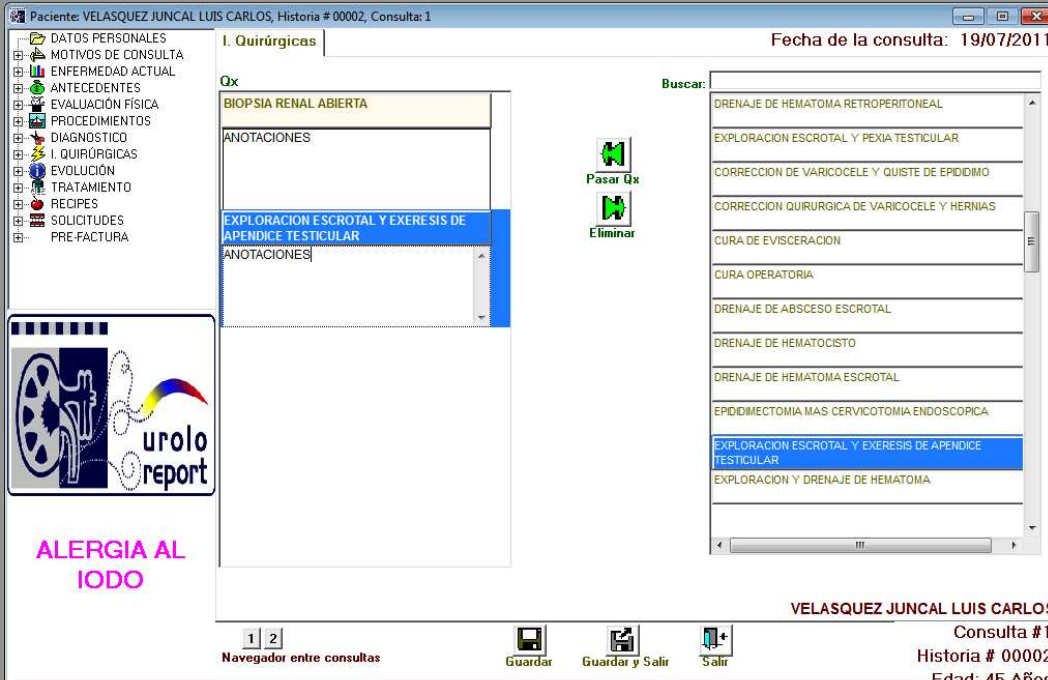

Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha de la consulta: 19/07/2011

I. Quirúrgicas

Qx

BIOPSIA RENAL ABIERTA

ANOTACIONES

EXPLORACION ESCROTAL Y EXERESIS DE APENDICE TESTICULAR

ANOTACIONES

Buscar:

- DRENAJE DE HEMATOMA RETROPERITONEAL
- EXPLORACION ESCROTAL Y PEXIA TESTICULAR
- CORRECCION DE VARICOCELE Y QUISTE DE EPIDIDIMO
- CORRECCION QUIRURGICA DE VARICOCELE Y HERNIAS
- CURA DE EVISCERACION
- CURA OPERATORIA
- DRENAJE DE ABSCESO ESCROTAL
- DRENAJE DE HEMATOCISTO
- DRENAJE DE HEMATOMA ESCROTAL
- EPIDIDMECTOMIA MAS CERVICOTOMIA ENDOSCOPICA
- EXPLORACION ESCROTAL Y EXERESIS DE APENDICE TESTICULAR
- EXPLORACION Y DRENAJE DE HEMATOMA

ALERGIA AL IODO


1 2
Navegador entre consultas

Guardar Guardar y Salir Salir

VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS
Consulta #1
Historia # 00002
Edad: 45 Años

Evolución

La ventana relacionada con el ítem Evolución presenta campos similares a la ventana del ítem ENFERMEDAD ACTUAL y puede ser llenada siguiendo el mismo procedimiento.

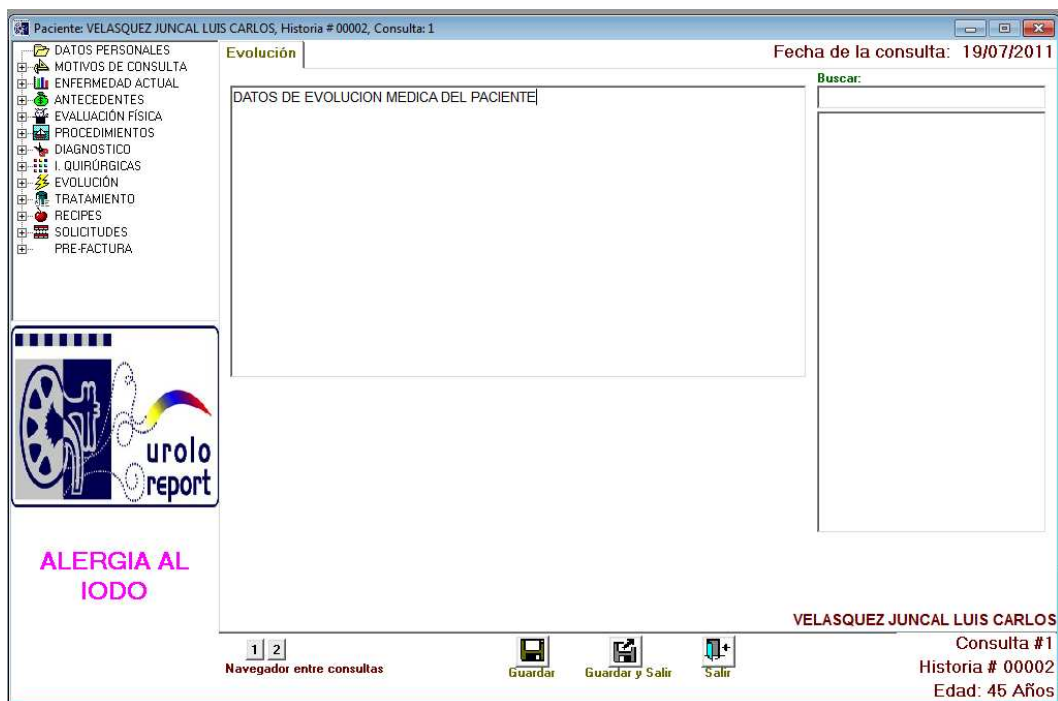

The screenshot shows a software window titled "Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1". The window is divided into several sections:

- Left Sidebar:** A menu with icons and labels for various medical data categories: DATOS PERSONALES, MOTIVOS DE CONSULTA, ENFERMEDAD ACTUAL, ANTECEDENTES, EVALUACIÓN FÍSICA, PROCEDIMIENTOS, DIAGNÓSTICO, QUIRÚRGICAS, EVOLUCIÓN (highlighted), TRATAMIENTO, RECIPES, SOLICITUDES, and PRE-FACTURA.
- Top Right:** "Fecha de la consulta: 19/07/2011" and a "Buscar:" field.
- Main Area:** A large text input field labeled "DATOS DE EVOLUCION MEDICA DEL PACIENTE".
- Bottom Left:** A logo for "urolo report" and the text "ALERGIA AL IODO".
- Bottom Right:** Patient information: "VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS", "Consulta #1", "Historia # 00002", and "Edad: 45 Años".
- Bottom Center:** Navigation and action buttons: "Navegador entre consultas" (with page indicators 1 and 2), "Guardar", "Guardar y Salir", and "Salir".



Tratamientos

En el sistema **UroloReport**, podemos incluir todos los tratamientos para determinadas afecciones del paciente, así en el momento de crear la Historia médica los tendremos disponibles.

Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha de la consulta: 19/07/2011

Tratamiento

TRATAMIENTO MEDICO ASIGNADO AL PACIENTE

Buscar:

urolo report

ALERGIA AL IODO

VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS


Consulta #1
Historia # 00002
Edad: 45 Años

1 2
Navegador entre consultas

Guardar Guardar y Salir Salir

Récpes

Prosiguiendo con el ítem RECIPES, en el mismo se presenta la ventana para realizar los r cpes. Existen dos maneras de realizar un r cipe, por **Medicamentos**   por **Tratamientos** completos. Al realizarlo por Medicamentos, basta s lo con seleccionar y pasar los medicamentos a indicar.

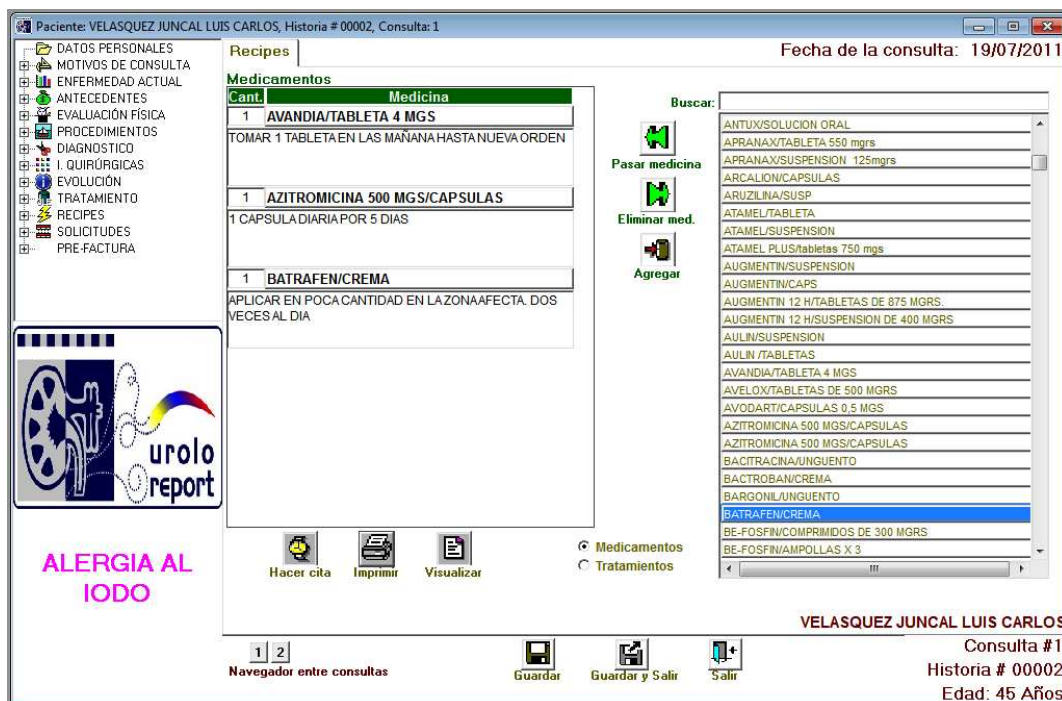

Paciente: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha de la consulta: 19/07/2011

Medicamentos

Cant.	Medicina
1	AVANDIA/TABLETA 4 MGS
TOMAR 1 TABLETA EN LAS MAÑANA HASTA NUEVA ORDEN	
1	AZITROMICINA 500 MGS/CAPSULAS
1 CAPSULA DIARIA POR 5 DIAS	
1	BATRAFEN/CREMA
APLICAR EN POCA CANTIDAD EN LA ZONA AFECTA. DOS VECES AL DIA	

Buscar:

- ANTUX/SOLUCION ORAL
- APRANAX/TABLETA 550 mgrs
- APRANAX/SUSPENSION 125mgrs
- ARCALION/CAPSULAS
- ARUZILINA/SUSP
- ATAMEL/TABLETA
- ATAMEL/SUSPENSION
- ATAMEL PLUS/tabletas 750 mgs
- AUGMENTIN/SUSPENSION
- AUGMENTIN/CAPS
- AUGMENTIN 12 H/TABLETAS DE 875 MGRS.
- AUGMENTIN 12 H/SUSPENSION DE 400 MGRS
- AULIN/SUSPENSION
- AULIN /TABLETAS
- AVANDIA/TABLETA 4 MGS
- AVELOX/TABLETAS DE 500 MGRS
- AVODART/CAPSULAS 0.5 MGS
- AZITROMICINA 500 MGS/CAPSULAS
- AZITROMICINA 500 MGS/CAPSULAS
- AZITROMICINA 500 MGS/CAPSULAS
- BACITRACINA/UNGUENTO
- BACTROBAN/CREMA
- BARGONIL/UNGUENTO
- BATRAFEN/CREMA**
- BE-FOSFIN/COMPRIADOS DE 300 MGRS
- BE-FOSFIN/AMPOLLAS X 3

ALERGIA AL IODO

Hacer cita Imprimir Visualizar

Medicamentos Tratamientos

VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS

Consulta #1

Historia # 00002

Edad: 45 Años

El programa cuenta con el Vadem cum venezolano incluyendo las indicaciones generales de los medicamentos aportadas por los laboratorios. Estas indicaciones son completamente editables para cada paciente a su juicio y dependiendo del esquema de tratamiento. Cualquier modificaci n de la indicaci n en esta ventana s lo ser  efectiva para este paciente. Si desea cambiar la indicaci n de un medicamento de forma definitiva debe hacerlo por medio del men  Archivo, Vadem cum.

Esta opci n nos permite Emitir R cpes a los Pacientes, con las indicaciones de los medicamentos a recetar, de igual manera  sta opci n nos permite crear nuevos medicamentos que no se encuentren en la lista al hacer click en **Agregar**.

Crear Nueva Cita



Al Hacer Click en **Hacer cita** el sistema nos presentará la siguiente pantalla:



The screenshot shows a window titled "Nueva cita" for patient "ELENA ROSA BUITRAGO". It features a calendar for July 2011 with days of the week (Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa) and dates (1-31). Below the calendar are two time selection fields: "Hora inicio:" set to 08:02 and "Hora fin:" set to 08:22. At the bottom are three icons: a floppy disk for "Guardar", a printer for "Imprimir", and a plus sign for "Salir". The window title bar includes standard OS controls and the text "Nueva cita".

En el calendario seleccionamos la Fecha a pautar para la Nueva Cita y la hora.

Utilizamos los iconos correspondientes, que nos permiten Guardar, Imprimir Récipe con Nueva Cita y Salir de la Pantalla.



La otra modalidad existente para realizar un récipe es mediante

Tratamientos completos para patologías específicas y totalmente personalizables por usted a su criterio. Para esto seleccione Tratamiento en la ventana, seguidamente cambiará la lista de medicamentos por la lista de tratamientos de los cuales usted podrá seleccionar el de su preferencia.

Una vez seleccionado los medicamentos puede tener una vista previa al oprimir el botón




Visualizar **Visualizar**. Podrá imprimir oprimiendo el botón imprimir **Imprimir** y concertar la próxima cita de su




paciente oprimiendo el botón Hacer Cita **Hacer cita**. Indicamos Fecha y Hora para Fijar Nueva Cita y



Hacemos click en el icono 



El récipe de su paciente se imprimirá en una hoja tipo carta de la siguiente forma:

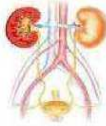

Dr. José Gregorio Álvarez S.
CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA
R.I.F.: V - 4065030

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAI C.I.: V-8548965
EDAD : 45 años FECHA: 20/07/2011
DIRECCIÓN: LOS CHORROS AV. PPAL. EDIF. JUAREZS PISO 12

Rp.

- 1 **AVANDIA / TABLETA 4 MGS**

- 1 **AZITROMICINA 500 MGS / CAPSULAS**

- 1 **BATRAFEN / CREMA**



Dr. José Gregorio Álvarez S.
CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA
R.I.F.: V - 4065030

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAI C.I.: V-8548965
EDAD : 45 años FECHA: 20/07/2011
DIRECCIÓN: LOS CHORROS AV. PPAL. EDIF. JUAREZS PISO 12

Indicaciones:

- AVANDIA / TABLETA 4 MGS**
TOMAR 1 TABLETA EN LAS MAÑANA HASTA NUEVA ORDEN

- AZITROMICINA 500 MGS / CAPSULAS**
1 CAPSULA DIARIA POR 5 DIAS

- BATRAFEN / CREMA**
APLICAR EN POCA CANTIDAD EN LA ZONA AFECTA. DOS VECES
AL DIA

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30
TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drdugante@yahoo.es

Próxima Cita: Hora

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30
TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drdugante@yahoo.es

Dr. José Gregorio Álvarez S.


Solicitudes

En el ítem SOLICITUDES, usted podrá imprimir solicitudes de exámenes de laboratorio, ecográficos, informes médicos, reposos, constancias médicas, etc. En cada pestaña encontrará el icono



Exámenes de Laboratorio

En la pestaña de Exámenes de laboratorio usted podrá imprimir solicitudes para que su paciente se realice exámenes de laboratorio. En la pestaña Rutina de exámenes podrá solicitar exámenes de laboratorios agrupados en rutinas completas tales como Hematología Completa, Perfil 20, etc. En la pestaña Solicitud de Estudios se encuentran las solicitudes para estudios Ecográficos, Radiográficos, etc.

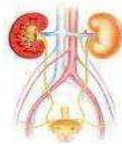

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA

R.I.F.: V - 4065030

EXÁMENES DE LABORATORIO

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL C.I.: V-8548965

EDAD: 45 Años

FECHA: 20/07/2011

ESPERMATOGRAMA

ESPERMOCULTIVO

F.S.H. Y L.H.

FOSFORO

GLICEMIA BASAL Y POST PANDRIAL

HEMATOLOGIA COMPLETA

HORMONA SEXUAL UNIDAA GLOBULINA

NIVELES DE INSULINA BASAL Y POST PAI

P.S.A. LIBRE

PROLACTINA

PRUEBA DE STAMEY (4 FRASCOS)

TESTOSTERONA TOTAL


TRIGLICERIDOS

UROCULTIVO

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30
TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drdugarte@yahoo.es

Ejemplo de Solicitud de Exámenes de Laboratorio

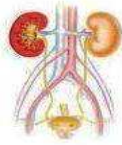

Dr. José Gregorio Álvarez S.
CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA
R.I.F.: V - 4065030

SOLICITUD DE ESTUDIOS

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL C.I.: V-8548965

EDAD: 45 años

FECHA: 20/07/2011

Estudios solicitados:

ECODOPPLER TESTICULAR

ECO DOPPLER DE PENE


Resumen clínico:

COLON IRRITABLE. ESCROTO AGUDO. ENFERMEDAD QUISTI
RENAL BILATERAL.

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30
TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drdugarte@yahoo.es

Ejemplo de Solicitud de Estudios

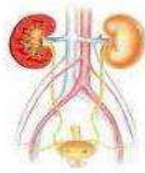

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA

RESUMEN MÉDICO

Paciente: LUIS CARLOS VELASQUEZ

Cédula: V-8548965

Edad: 45 años ^{UNICAL}

Fecha: 20/07/2011

MOTIVO DE CONSULTA:

CHEQUEO INGLE IZQUIERDA
CHEQUEO PROSTATICO
DOLOR EN REGION INGUINAL DERECHO

ENFERMEDAD ACTUAL:

INCONTINENCIA URINARIA
INFLAMACION

EXAMEN FÍSICO:

GENERAL: DATOS, CARDIOPULMONAR: DATOS, ABDOMEN: DATOS, REGIÓN INGUINAL: DATOS,
GENITALES EXTERNOS MASCULINOS
PENE: DATOS DEL EXAMEN FISICO,
ESCROTO DERECHO:
CODÓN ESPERMÁTICO: DATOS DEL EXAMEN FISICO, TEXTICULOS: DATOS DEL EXAMEN FISICO, EPIDÍDIMO: DATOS DEL EXAMEN FISICO,
ESCROTO IZQUIERDO:
CODÓN ESPERMÁTICO: DATOS DEL EXAMEN FISICO, EPIDÍDIMO: DATOS DEL EXAMEN FISICO,
TACTO RECTAL
ESFINTER: Normotonico AMPOLLA RECTAL: Vacía TAMAÑO: Grado I SIMETRICA
CONSISTENCIA: Adematosa NO PRESENTA NODULOS SURCO MEDIO = SI
OBSERVACIÓN: DATOS DEL EXAMEN FISICO
NEUROLOGICO: DATOS OTROS: DATOS

DIAGNOSTICO

ESCROTO AGUDO
ENFERMEDAD QUISTICA RENAL BILATERAL
COLON IRRITABLE

INTERVENCIONES Q.

BIOPSIA RENAL ABIERTA
ANOTACIONES

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30
TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drduqarte@yahoo.es
CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30
TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drdugarte@yahoo.es

Ejemplo de Reposo Médico



Dr. José Gregorio Álvarez S.

CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA
R. I. F.: V - 4065030

HISTORIA CLINICA

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL
Edad: 45 años.

HISTORIA: 00002
Fecha 20/07/2011

MOTIVO DE CONSULTA:

CHEQUEO INGLE IZQUIERDA
CHEQUEO PROSTATICO
DOLOR EN REGION INGUINAL DERECHO

PSICOBIOLOGICOS

TRATAMIENTOS /

PERSONAL

ALERGIA AL IODO /

FAMILIAR

MADRE MUERTA POR ACV /

ENFERMEDAD ACTUAL:

INCONTINENCIA URINARIA
INFLAMACION

EXAMEN FISICO:

GENERAL: DATOS, CARDIOPULMONAR: DATOS, ABDOMEN: DATOS, REGIÓN INGINAL: DATOS
GENITALES EXTERNOS MASCULINOS
PENE: DATOS DEL EXAMEN FISICO,
ESCROTO DERECHO:
CODÓN ESPERMÁTICO: DATOS DEL EXAMEN FISICO, TEXTICULOS: DATOS DEL EXAMEN FISI
EPIDÍDIMO: DATOS DEL EXAMEN FISICO,
ESCROTO IZQUIERDO:
CODÓN ESPERMÁTICO: DATOS DEL EXAMEN FISICO, EPIDÍDIMO: DATOS DEL EXAMEN FISIC
TACTO RECTAL
ESFINTER: Normotonico AMPOLLA RECTAL: Vacía TAMAÑO: Grado I SIMETRICA CONSISTENC
Adematos a NO PRESENTA NODULOS SURCO MEDIO = SI OBSERVACIÓN: DATOS DEL EXAME
NEUROLOGICO: DATOS OTROS: DATOS

DIAGNOSTICO

ESCROTO AGUDO
ENFERMEDAD QUÍSTICA RENAL BILATERAL
COLON IRRITABLE

INTERVENCIONES Q.

BIOPSIA RENAL ABIERTA
ANOTACIONES

EXPLORACION ESCROTAL Y EXERESIS DE APENDICE TESTICULAR
ANOTACIONES

TRATAMIENTO:

TRATAMIENTO MEDICO ASIGNADO AL PACIENTE

TRATAMIENTO: Medicinas:


AVANDIA/TABLETA 4 MGS
AZITROMICINA 500 MGS/CAPSULAS

BATRAFEN/CREMA

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO. 10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30 AM A 11:30 AM

Ejemplo de Informe Médico

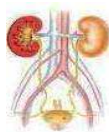

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA
R.I.F.: V - 4065030

HISTORIA CLINICA

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL

HISTORIA: 00002

Edad: 45 años.

Fecha 20/07/2011

MOTIVO DE CONSULTA:

CHEQUEO INGLE IZQUIERDA
CHEQUEO PROSTATICO
DOLOR EN REGION INGUINAL DERECHO

PSICOBIOLÓGICOS

TRATAMIENTOS /

PERSONAL

ALERGIA AL IODO /

FAMILIAR

MADRE MUERTA POR ACV /

ENFERMEDAD ACTUAL:

INCONTINENCIA URINARIA
INFLAMACION

EXAMEN FÍSICO:

GENERAL: DATOS. CARDIOPULMONAR: DATOS, ABDOMEN: DATOS, REGIÓN INGUINAL: DATOS
GENITALES EXTERNOS MASCULINOS
PENE: DATOS DEL EXAMEN FÍSICO,
ESCROTO DERECHO:
CODÓN ESPERMÁTICO: DATOS DEL EXAMEN FÍSICO, TEXTÍCULOS: DATOS DEL EXAMEN FÍSICO
EPIDÍMIMO: DATOS DEL EXAMEN FÍSICO,
ESCROTO IZQUIERDO:
CODÓN ESPERMÁTICO: DATOS DEL EXAMEN FÍSICO, EPIDÍMIMO: DATOS DEL EXAMEN FÍSICO
TACTO RECTAL
ESFINTER: Normotónico AMPOLLA RECTAL: Vacía TAMAÑO: Grado I SIMÉTRICA CONSISTENCIA
Adematosa NO PRESENTA NÚDULOS SURCO MEDIO = SI OBSERVACIÓN: DATOS DEL EXAMEN FÍSICO
NEUROLÓGICO: DATOS OTROS: DATOS

DIAGNÓSTICO

ESCROTO AGUDO
ENFERMEDAD QUISTICA RENAL BILATERAL
COLON IRRITABLE

INTERVENCIONES Q.

BIOPSIA RENAL ABIERTA
ANOTACIONES

EXPLORACION ESCROTAL Y EXERESIS DE APÉNDICE TESTICULAR

ANOTACIONES

TRATAMIENTO:

TRATAMIENTO MÉDICO ASIGNADO AL PACIENTE

TRATAMIENTO: Medicinas:


AVANDIA/TABLETA 4 MGS
AZITROMICINA 500 MGS/CAPSULAS

BATRAFEN/CREMA

Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30 AM A 11:30 AM

Ejemplo de Historia Clínica

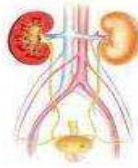

Dr. José Gregorio Álvarez S.
CIRUJANO UROLOGO - PEDIATRA
R.I.F.: V - 4065030

CIUDAD GUAYANA, 19/07/2011

CONSTANCIA

PACIENTE: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL EDAD: 45 Años
C.I.: V-8548965

Por medio de la presente se hace constar que la (el) paciente
LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL, asistió a CONSULTA MÉDICA
el día 19/07/2011.

IDX:

COLON IRRITABLE. ESCROTO AGUDO. ENFERMEDAD QUISTICA
RENAL BILATERAL.

OBSERVACIONES


Dr. José Gregorio Álvarez S.

CLINICA CHILEMEX CALLE CHILE ANEXO NUEVO PB CONSULTORIO NRO.10
CONSULTAS DE LUNES A VIERNES 7:30AM A 11:30
TELEFONOS 0414-4507514 / 04166870424 / 04148608888 E-MAIL drdugarte@yahoo.es

Ejemplo de Constancias

Pre-Factura

Finalmente el ítem PRE-FACTURA, despliega un ventana en la cual usted podrá colocar los importes por los cuales usted va a cobrar al paciente, para agregarlo haga doble clic sobre el importe o utilice los botones agregar y quitar, una vez finalizada la selección presione el botón Guardar y Cerrar. Estos importes son totalmente configurables en el menú Archivo, Elementos de Facturación.

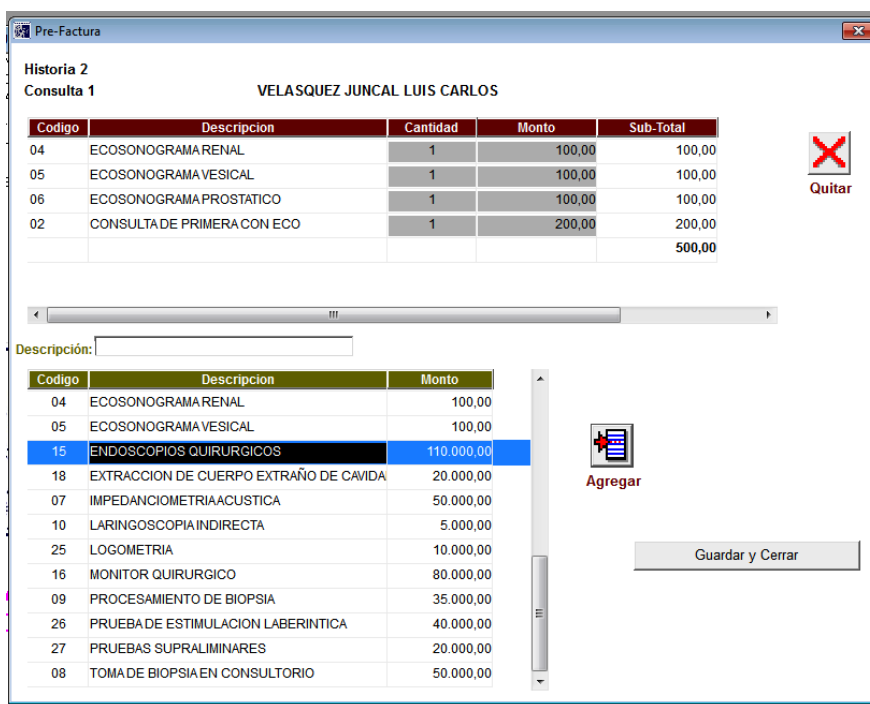

Pre-Factura

Historia 2
Consulta 1
VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Monto	Sub-Total
04	ECOSONOGRAMA RENAL	1	100,00	100,00
05	ECOSONOGRAMA VESICAL	1	100,00	100,00
06	ECOSONOGRAMA PROSTATICO	1	100,00	100,00
02	CONSULTA DE PRIMERA CON ECO	1	200,00	200,00
				500,00

Quitar

Descripcion:


Codigo	Descripcion	Monto
04	ECOSONOGRAMA RENAL	100,00
05	ECOSONOGRAMA VESICAL	100,00
15	ENDOSCOPIOS QUIRURGICOS	110.000,00
18	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO DE CAVIDA	20.000,00
07	IMPEDANCIOMETRIA ACUSTICA	50.000,00
10	LARINGOSCOPIA INDIRECTA	5.000,00
25	LOGOMETRIA	10.000,00
16	MONITOR QUIRURGICO	80.000,00
09	PROCESAMIENTO DE BIOPSIA	35.000,00
26	PRUEBA DE ESTIMULACION LABERINTICA	40.000,00
27	PRUEBAS SUPRALIMINARES	20.000,00
08	TOMA DE BIOPSIA EN CONSULTORIO	50.000,00

Agregar

Guardar y Cerrar


El médico puede crear la Prefactura en el momento de Atender al Paciente Guardar la información para que posteriormente la Secretaria emita la Factura.

Una vez que finalice con la consulta de su paciente es importante que presione el botón Guardar y


Salir  Guardar y Salir para que la información quede almacenada en la base de datos del programa.

¿Cómo Hacer Citas?

Para administrar las citas de sus pacientes vaya al menú Consultas, Hacer Cita.

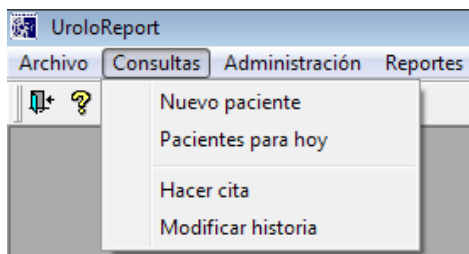

Seleccionando esta opción se abrirá la ventana siguiente donde podrá administrar la cita de sus pacientes, simplemente seleccione el paciente de la lista de pacientes que se despliega a la izquierda y presione el botón Hacer Cita para colocar el día y la hora de su próxima consulta.

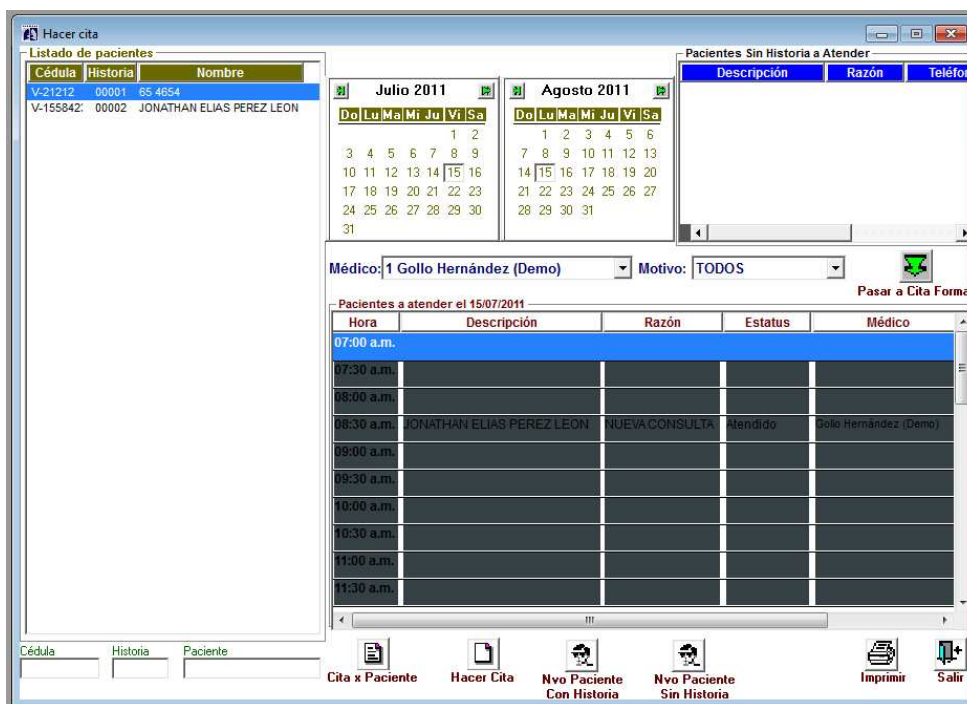

Cita x Paciente



Hacer Cita

Cita por Paciente: Crear Cita y Ver por pantalla Cita por Paciente

Hacer Cita: Crear una nueva Cita a Un Paciente



Seleccionamos la Fecha y Hora de la Cita a asignar al Paciente, luego hacer clic en el Icono
Para regresar a la Pantalla

anterior y asignar una Nueva Cita

hacer clic en  Nuevo Paciente o en el



icono  Salir

Este menú de opciones nos ayudara a trabajar con las citas de los Pacientes:

Borrar Cita

Modificar Cita

Imprimir Cita

Salir del Sistema



Borrar cita



Modificar



Imprimir




Salir


Si desea Modificar o Eliminar una cita, busque el día correspondiente de la cita en el calendario que se muestra en la ventana, seleccione el paciente y presione el botón correspondiente a la acción que desea realizar. Igualmente puede imprimir la lista de citas por día.

¿Cómo Modificar Consultas?

Si usted requiere modificar cualquier información en la historia de alguno de sus pacientes, imprimir un informe médico posterior a la consulta, reimprimir récipes, ordenes de exámenes, etc., vaya al menú Consultas, Modificar Consultas.

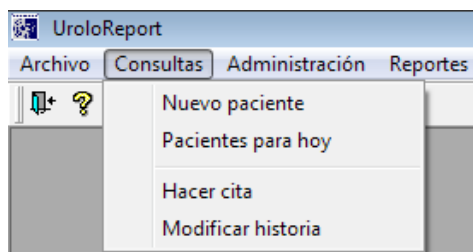


Al seleccionar esta opción se abrirá la ventana siguiente, en la cual usted podrá seleccionar con doble clic el paciente del cual necesita revisar la historia médica. Una vez seleccionado el paciente, seleccione en el panel derecho la consulta a la cual quiere acceder y presione el botón Modificar. Una vez realizado esto se abrirá la ventana de la historia médica del paciente.

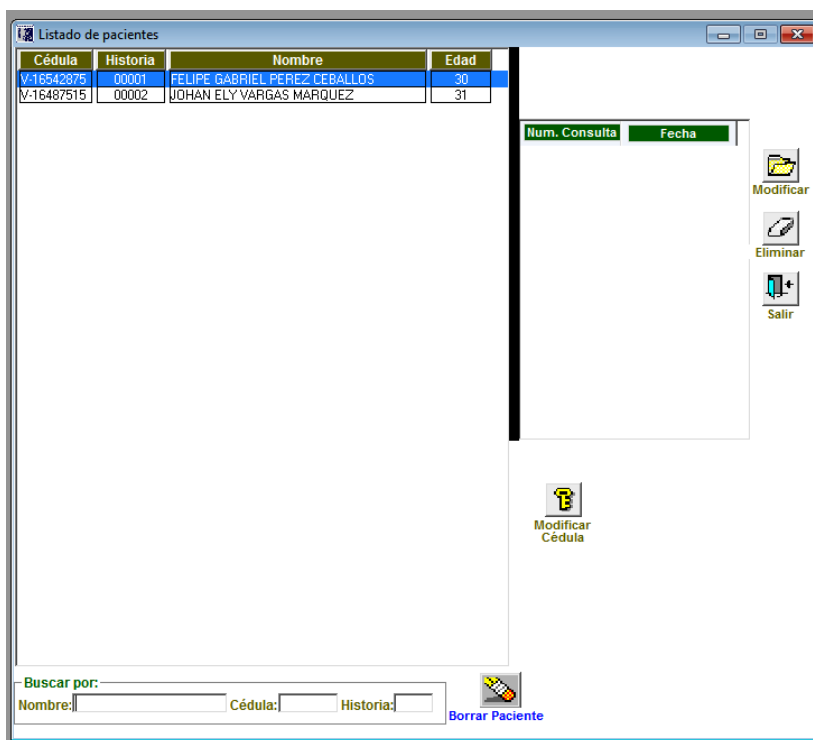

Cabe destacar también, que este es el único lugar en el cual usted podrá cambiar el numero de cedula de un paciente o podrá eliminar la historia médica de un paciente permanentemente.

La ventana de Historia médica en la opción de modificar se presenta así:

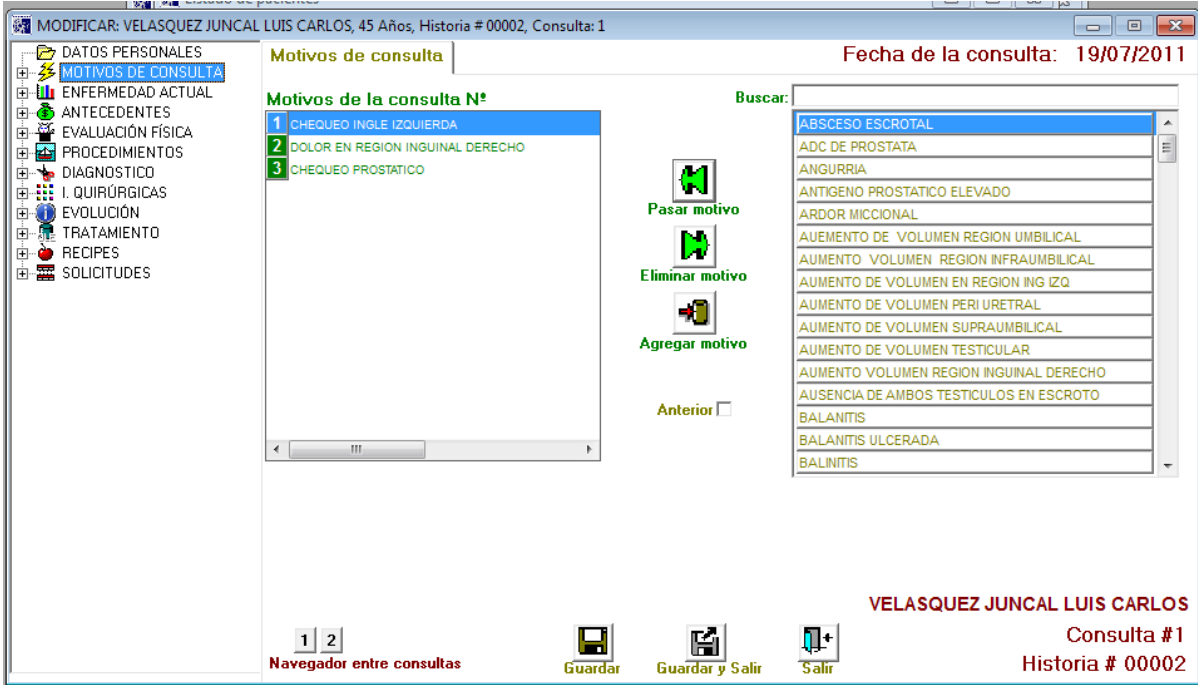

MODIFICAR: VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS, 45 Años, Historia # 00002, Consulta: 1

Fecha de la consulta: 19/07/2011

Motivos de consulta

Motivos de la consulta N°

- CHEQUEO INGLE IZQUIERDA
- DOLOR EN REGION INGUINAL DERECHO
- CHEQUEO PROSTATICO

Buscar:

- ABSCESO ESCROTAL
- ADC DE PROSTATA
- ANGURRIA
- ANTIGENO PROSTATICO ELEVADO
- ARDOR MICCIONAL
- AUMENTO DE VOLUMEN REGION UMBILICAL
- AUMENTO VOLUMEN REGION INFRAUMBILICAL
- AUMENTO DE VOLUMEN EN REGION ING IZQ
- AUMENTO DE VOLUMEN PERI URETRAL
- AUMENTO DE VOLUMEN SUPRAUMBILICAL
- AUMENTO DE VOLUMEN TESTICULAR
- AUMENTO VOLUMEN REGION INGUINAL DERECHO
- AUSENCIA DE AMBOS TESTICULOS EN ESCROTO
- BALANITIS
- BALANITIS ULCERADA
- BALINITIS


Anterior

Navegador entre consultas

VELASQUEZ JUNCAL LUIS CARLOS
 Consulta #1
 Historia # 00002

¿Cómo llevar la Administración?

Hacer click en el Menú Administración y se presentará la pantalla :

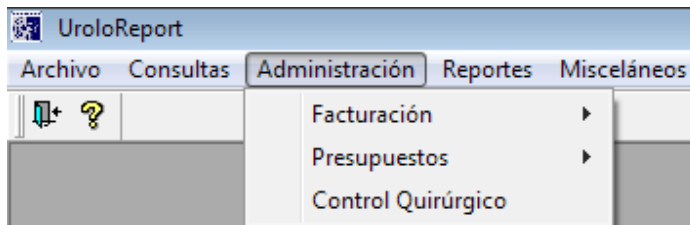


En este menú usted encontrará varias opciones:


- Facturación: en la cual usted podrá imprimir facturas y revisar las facturas emitidas
- Presupuestos: en la cual usted podrá emitir presupuestos
- Control Quirúrgico: esta es una aplicación que le organizará el tiempo y los recursos para referidos a las intervenciones quirúrgicas que usted tenga planificadas.

¿Cómo Facturar?

Hacer click en el SubMenu Administración y luego en Facturación

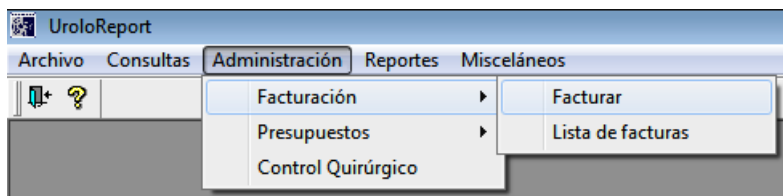

Al entrar en la opción de Facturar, el sistema nos presenta la pantalla para cargar los datos:

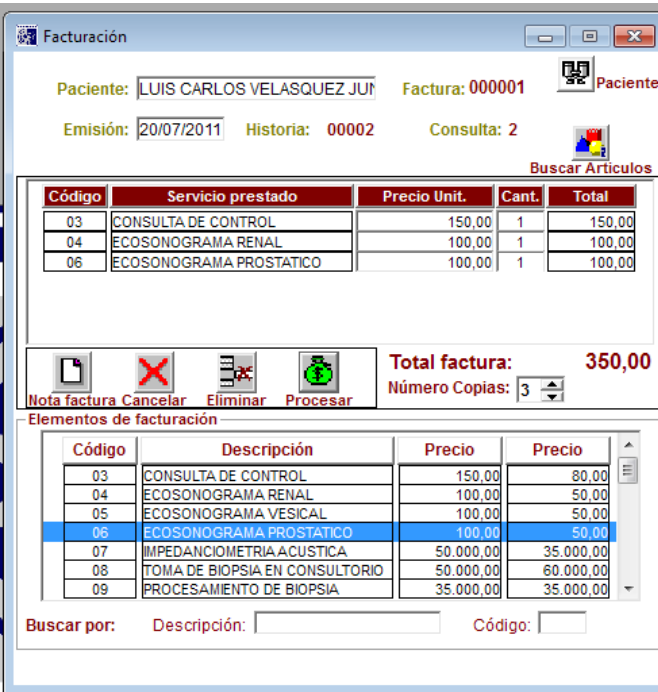

Paciente: LUIS CARLOS VELASQUEZ JUN Factura: 000001

Emisión: 20/07/2011 Historia: 00002 Consulta: 2



Código	Servicio prestado	Precio Unit.	Cant.	Total
03	CONSULTA DE CONTROL	150,00	1	150,00
04	ECOSONOGRAMA RENAL	100,00	1	100,00
06	ECOSONOGRAMA PRÓSTATICO	100,00	1	100,00

Total factura: 350,00
Número Copias: 3

Elementos de facturación


Código	Descripción	Precio	Precio
03	CONSULTA DE CONTROL	150,00	80,00
04	ECOSONOGRAMA RENAL	100,00	50,00
05	ECOSONOGRAMA VESICAL	100,00	50,00
06	ECOSONOGRAMA PRÓSTATICO	100,00	50,00
07	IMPEDANCIOMETRIA ACUSTICA	50.000,00	35.000,00
08	TOMA DE BIOPSIA EN CONSULTORIO	50.000,00	60.000,00
09	PROCESAMIENTO DE BIOPSIA	35.000,00	35.000,00


Buscar por: Descripción: Código:


Si la Factura esta precargada en un determinado paciente al momento de Hacer clic en  y luego doble click sobre el nombre del paciente a quien le vamos a facturar, todos los datos de la factura son cargados en pantalla, luego clikeamos en  **Procesar** Para guardar la factura e inmediatamente se imprime.



¿Cómo Generar un Presupuesto?

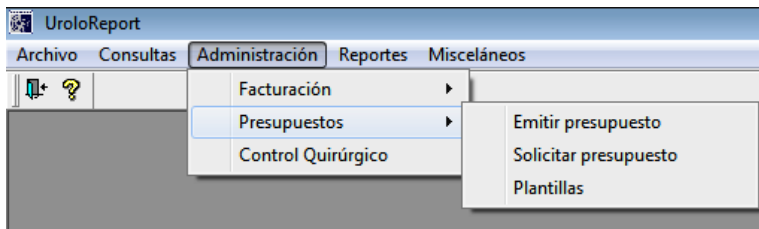Hacer click en el SubMenu Administración y luego en Presupuesto, luego en Emitir presupuesto :







Podemos generar un Presupuesto a un Paciente que ha sido atendido anteriormente haciendo click en el icono  **Pacientes**. La otra opción es ingresando los datos directamente en caso de ser un paciente eventual.

Todos los datos de la factura son cargados en pantalla, luego clickeamos en  **Procesar**. Para guardar el Presupuesto e inmediatamente se imprime.

Presupuesto
 Pacientes: **Paciente:** LUIS CARLOS VELASQUEZ JUN **Presupuesto:** 000001 
Emisión: 20/07/2011 **Historia:** 00002 **Consulta:** ? 
 Buscar Artículos

Código	Servicio prestado	Precio Unit.	Cant.	Total
18	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO	20.000,00	1	20.000,00
17	ALQUILER DE FUENTE DE LUZ	60.000,00	1	60.000,00
27	PRUEBAS SUPRALIMINARES	20.000,00	1	20.000,00

    **Total Presu.: 100.000,00**


Elementos de facturación

Código	Descripción	Precio	Precio
22	ALQUILER FUENTE DE LUZ	50.000,00	60.000,00
23	ALQUILER DE ENDOSCOPIOS	120.000,00	120.000,00
24	CAUTERIZACION DE SEPTUM NASAL	20.000,00	30.000,00
25	LOGOMETRIA	10.000,00	15.000,00
26	PRUEBA DE ESTIMULACION LABERINT	40.000,00	35.000,00
27	PRUEBAS SUPRALIMINARES	20.000,00	20.000,00
28	CONSULTA DE EMERGENCIA	50.000,00	35.000,00


Buscar por: Descripción: Código:

¿Cómo Emitir Reportes?

En este menú usted encontrará las siguientes opciones:

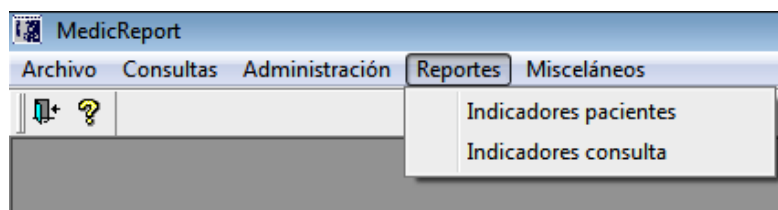


- Indicadores pacientes: esta opción despliega una ventana que le permitirá generar reportes de los pacientes por fecha de ingreso, rango de edades y procedencia:

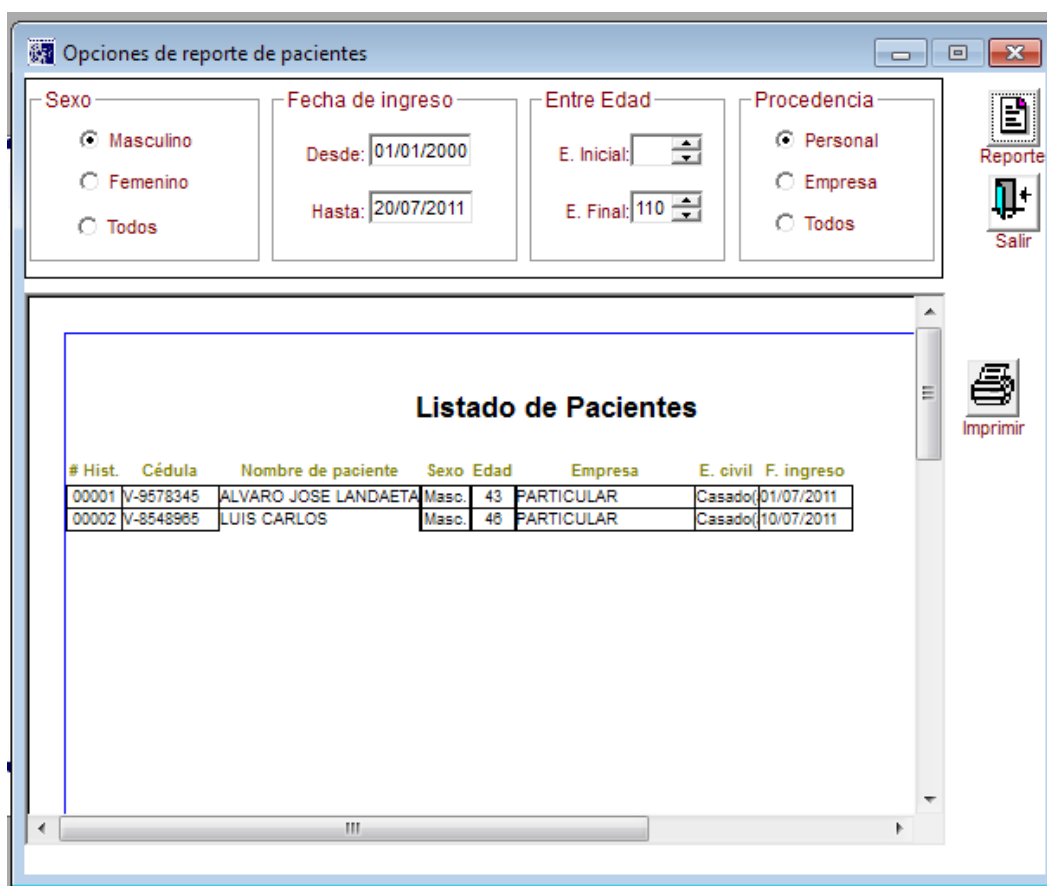

# Hist.	Cédula	Nombre de paciente	Sexo	Edad	Empresa	E. civil	F. ingreso
00001	V-9578345	ALVARO JOSE LANDAETA	Masc.	43	PARTICULAR	Casado	01/07/2011
00002	V-8548985	LUIS CARLOS	Masc.	48	PARTICULAR	Casado	10/07/2011

- Indicadores consulta: esta opción despliega una ventana que le permitirá generar reportes y estadísticas de sus pacientes por motivos de consulta, diagnostico, género, antecedentes, edad y medicamentos prescritos.

Tildamos las casillas donde se va a indicar las opciones a consultar, en la siguiente pantalla:

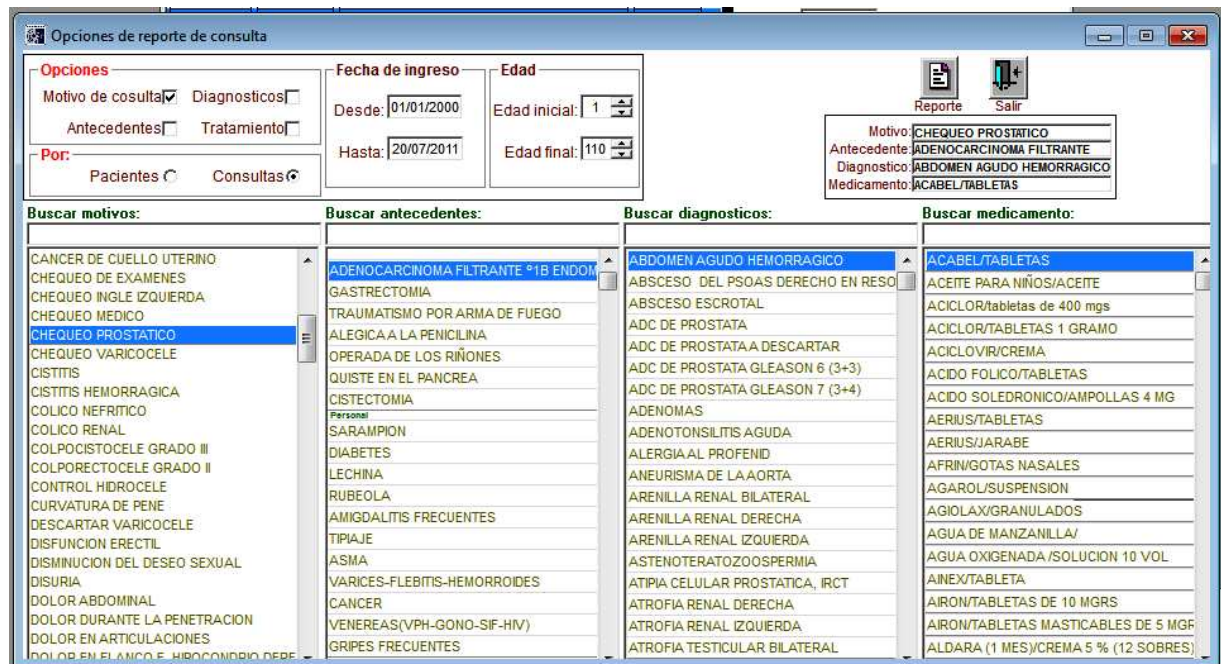

Opciones de reporte de consulta

Opciones: Motivo de consulta Diagnósticos
Antecedentes Tratamiento

Por: Pacientes Consultas

Fecha de ingreso: Desde: 01/01/2000 Hasta: 20/07/2011


Edad: Edad inicial: 1 Edad final: 110

Reporte Salir

Motivo: CHEQUEO PROSTATICO
Antecedente: ADENOCARCINOMA FILTRANTE
Diagnostico: ABDOMEN AGUDO HEMORRAGICO
Medicamento: ACABEL/TABLETAS


Buscar motivos:	Buscar antecedentes:	Buscar diagnosticos:	Buscar medicamento:
CANCER DE CUELLO UTERINO	ADENOCARCINOMA FILTRANTE *1B ENDOM	ABDOMEN AGUDO HEMORRAGICO	ACABEL/TABLETAS
CHEQUEO DE EXAMENES	GASTRECTOMIA	ABSCESO DEL PSOAS DERECHO EN RESO	ACEITE PARA NIÑOS/ACEITE
CHEQUEO INGLE IZQUIERDA	TRAUMATISMO POR ARMA DE FUEGO	ABSCESO ESCROTAL	ACICLOR/tabletas de 400 mgs
CHEQUEO MEDICO	ALEGICA A LA PENICILINA	ADC DE PROSTATA	ACICLOR/TABLETAS 1 GRAMO
CHEQUEO VARICOCELE	OPERADA DE LOS RIÑONES	ADC DE PROSTATA A DESCARTAR	ACICLOVIR/CREMA
CISTITIS	QUISTE EN EL PANCREA	ADC DE PROSTATA GLEASON 6 (3+3)	ACIDO FOLICO/TABLETAS
CISTITIS HEMORRAGICA	CISTECTOMIA	ADC DE PROSTATA GLEASON 7 (3+4)	ACIDO SOLEDRONICO/AMPOLLAS 4 MG
COLICO NEFRITICO	Personal	ADENOMAS	AERIUS/TABLETAS
COLICO RENAL	SARAMPION	ADENOTONSILITIS AGUDA	AERIUS/JARABE
COLPOCISTOCELE GRADO III	DIABETES	ALERGIA AL PROFENID	AFRIN/GOTAS NAsALES
COLPORECTOCELE GRADO II	LECHINA	ANEURISMA DE LA AORTA	AGAROL/SUSPENSION
CONTROL HIDROCELE	RUBEOLA	ARENILLA RENAL BILATERAL	AGIOLAX/GRANULADOS
CURVATURA DE PENE	AMIGDALITIS FRECUENTES	ARENILLA RENAL DERECHA	AGUA DE MANZANILLA/
DESCARTAR VARICOCELE	TIPIAJE	ARENILLA RENAL IZQUIERDA	AGUA OXIGENADA/SOLUCION 10 VOL
DISFUNCION ERECTIL	ASMA	ASTENOTERATOZOOSPERMIA	AINEX/TABLETA
DISMINUCION DEL DESEO SEXUAL	VARICES-FLEBITIS-HEMORROIDES	ATIPIA CELULAR PROSTATICA, IRCT	AIRON/TABLETAS DE 10 MGRS
DISURIA	CANCER	ATROFIA RENAL DERECHA	AIRON/TABLETAS MASTICABLES DE 5 MGF
DOLOR ABDOMINAL	VENEREAS(VPH-GONO-SIF-HIV)	ATROFIA RENAL IZQUIERDA	ALDARA (1 MES)/CREMA 5 % (12 SOBRES)
DOLOR DURANTE LA PENETRACION	GRIPE FRECUENTES	ATROFIA TESTICULAR BILATERAL	
DOLOR EN ARTICULACIONES			
DOLOR EN EL ANCO F. HIBOCOMBIO DEBE			

Según la información solicitada, los datos a obtener serían algo similar a la siguiente imagen:

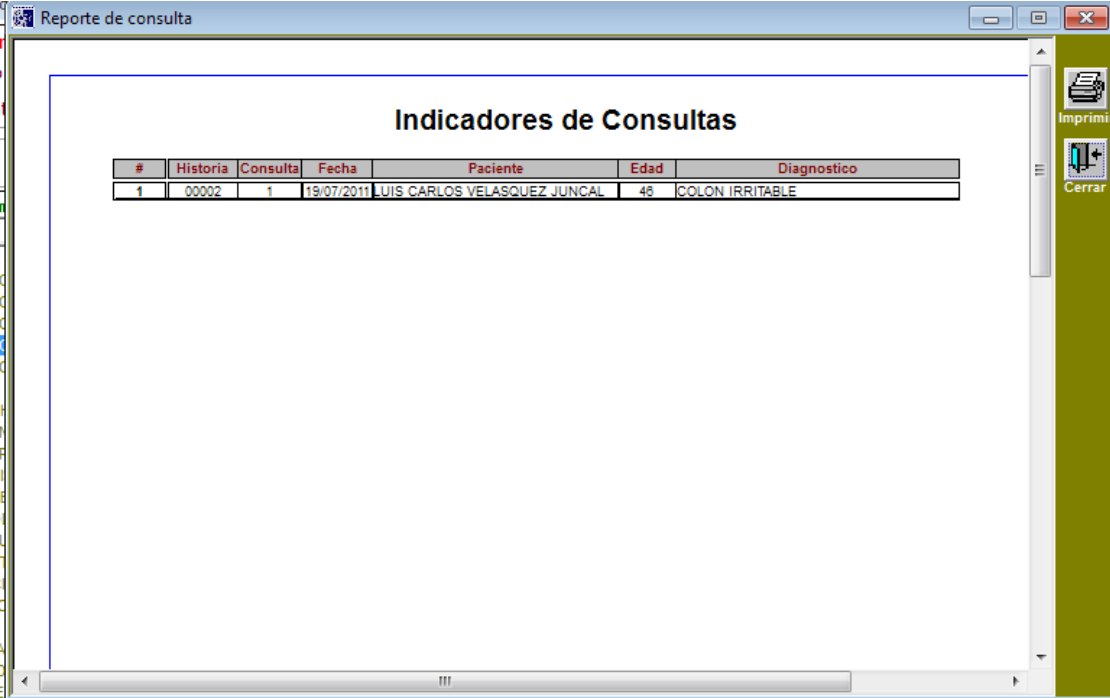A screenshot of a software window titled 'Reporte de consulta'. The window contains a table with the title 'Indicadores de Consultas'. The table has seven columns: '#', 'Historia', 'Consulta', 'Fecha', 'Paciente', 'Edad', and 'Diagnostico'. There is one data row with the following values: '# 1', 'Historia 00002', 'Consulta 1', 'Fecha 19/07/2011', 'Paciente LUIS CARLOS VELASQUEZ JUNCAL', 'Edad 46', and 'Diagnostico COLON IRRITABLE'. On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for 'Imprimir' (print) and 'Cerrar' (close).

¿Cómo trabajar con el Menú Misceláneos?

En este menú encontrará herramientas como Calculadora y Solitario, también encontrará la opción Acerca de... que le indicará los datos de su licencia y versión del programa.

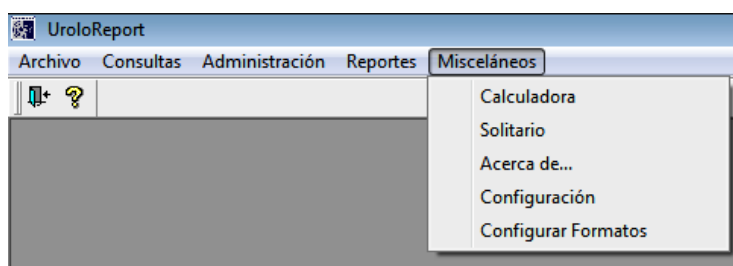

En la opción Configuración usted podrá colocar su información profesional, la cual será impresa en Récipes, Informes, etc. Usted puede cambiar esta información cuantas veces desee. Esta información está referida al Logotipo, Especialidad, Ciudad, RIF, Pié de página de Récipes y Pié de página de Informes.